

コンバテックストーマ用品 総合カタログ

2023-2024

Convatec
Ostomy supplies Catalogue
2023-2024



convatec

— よりそい、つなぐ —

コンバテックのビジョン

私たちが携わる

すべての皆さまの生活をより良くするために

信頼されるメディカルソリューションの

先駆者でありつづけます

Contents

目次

コンバテックの歴史	3
コンバテックme+™クラブ	4
公式SNS情報発信サービス	6
コンバテック装具選択ガイド	7
ストーマ装具早見表	8

製品特長

面板	
コンバテックの皮膚保護剤	10
コンバテックの面板の構造・形状	11
ストーマ袋	
新設計のストーマ袋	12
やわらかシリーズ	14
コンバテック モルダブル テクノロジー™	20
ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ	22

製品紹介

単品系ストーマ装具	24
やわらかシリーズ	25
エスティム™ シリーズ	29
アクティブライフ® シリーズ	33
二品系ストーマ装具	35
ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ	36
ナチュラ™ シリーズ	38
バリケア® オートロック シリーズ	45
エスティム シナジー® シリーズ	47

小児用ストーマ装具	49
-----------------	----

ストーマ装具併用品	51
-----------------	----

ストーマ用洗腸用具	62
-----------------	----

製品の使用方法

単品系ストーマ装具の使用方法	65
二品系ストーマ装具の使用方法	67
ストーマ袋の閉鎖具の使用方法	69
ストーマ装具併用品の使用方法	72

索引	74
----------	----

よりそい、つなぐ



私たちの生活は、さまざまな人のつながりの中で地域や社会が形成され、異なる世代を通じて移り変わってゆきます。オストメイトを取り巻く環境も、多様化する人と社会のつながりの中で、より良いストーマケアが求められ変化してきました。

私たちコンバテックは、そのように多様化する環境の中で、オストメイト、そしてストーマケアに従事するすべての人によりそい、誰もが簡単に扱えて、漏れのない安心な生活を過ごしていただきたいという思いを持ち続け、「誰でもシンプルに漏れないケアを実現できる」ストーマケア製品の提供を目指してきました。

同時に、日本国内では40年以上にわたり皆さまと共に歩ませていただいた中で、私たちはオストメイトを中心とした医療、地域社会、生活、そして人を「つなぐ」役割でありたいとも思うようになりました。それは、つながりで得られる力がオストメイトにとって充実した毎日を創ると考えるからです。

コンバテックは、そのつながりの中で得ることのできる最良のストーマケアを目指していく企業として「つなぐシンプルケア」を新しく提言させていただきます。

医療と地域社会をつなぐ
地域社会と生活をつなぐ
生活と人をつなぐ

つなぐシンプルケア



Our History

コンバテックの歴史

コンバテックは、世界で初めて皮膚保護性を有する粘着剤を開発し、現在の皮膚保護剤のスタンダードであるポリマーブレンド系皮膚保護剤のはじまりとなった「バリケア®」として製品化するなど、ストーマ装具の技術的基盤を築き、ストーマをお持ちの皆さまの生活の質（QOL）向上に貢献して参りました。

「バリケア®」をはじめとするコンバテックの皮膚保護剤と、モルダブル テクノロジー™などの先駆的技術は、世界中の医療従事者より高い評価と信頼をいただき、多くのストーマをお持ちの皆さまにご使用いただいております。

- 1960年代 ——— スクイブ・コーポレーションが開発した歯科用粘着材をストーマケア製品として製品化。画期的な製品として高い支持を得る。
- 1978年 ——— 日本における、スクイブ・コーポレーションの独立部門としてコンバテック事業部設立。「バリケア® ウェハー」と世界最初の二品系ストーマ装具バリケア® システム2を発売。
- 1999年 ——— 「バリケア® ナチュラ™」発売
- 2000年 ——— 「バリケア® オートロック」発売
- 2004年 ——— コンバテック モルダブル テクノロジー™製品発売
- 2010年 ——— 新設計ストーマ袋（エスティーム™／エスティーム シナジー®）発売
- 2012年 ——— 新設計ストーマ袋（ナチュラ™ プラス）発売
「エスティーム™ CVX」発売
「ニルタック™」、「シレッゼ™」発売
- 2013年 ——— 「エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期」発売
- 2014年 ——— 「コンバテック シール」発売
「エスティーム™ モルダブル」発売
- 2016年 ——— 「エスティーム™ やわらか凸」発売
- 2017年 ——— 「やわらか凸 イレオ」、「やわらか平面 イレオ」発売
二品系浮動型フランジ「ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ」発売
- 2018年 ——— パナソニックの独自技術で生まれた「ニオフ消臭潤滑剤」発売
パナソニックの独自技術で生まれた「ニオフ消臭スプレー」発売
- 2019年 ——— 「エスティーム™ やわらか凸 シャロー」発売
「エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ」発売
- 2021年 ——— 「やわらか凸 シャロー イレオ」発売
デジタルサービス開始
- 2022年 ——— エセンタ™ シリーズ発売
「ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用」発売




コンバテックme+™クラブ

コンバテックとともに安心して日常生活を送りませんか？

入会費・年会費無料



『コンバテックme+™クラブ』は、ストーマ保有者と支援者の方々によりそい、サポートする事を目的とした会員制のクラブです。
会員の皆さまには、専用のWEBサイト・メールを通じて、お役立ち情報の提供やストーマケアに関するご相談にご対応いたします。他社製品を使用されている方もご入会いただけます。

コンバテックme+™クラブ 会員登録方法

いずれかの方法で「コンバテックme+™クラブ」へアクセス

スマートフォンで下記QRコードを読み込む



「コンバテッククラブ」で検索

下記URLを入力
<https://bit.ly/3uJ6jg3>

1 「会員登録」を押す

2 「今すぐ新規会員登録」を押す

3 「メールアドレス」を記入し、「確認コードを送信」を押す

4 メールで届いた確認コードを記入し、コードの確認を押す

5 必要情報を記入して作成を押し、プロフィールを記入して登録終了です

「ストーマ保有者・ご家族の方」
ご入会いただきますと
お出かけに便利な
トラベルポーチを差し上げます。

カラーは4色ありますが色は選べません。

*ストーマ保有者お一人に1つになります。
**デザインが変更になる事があります。
※写真は例です。装具やアクセサリ製品などは入っていません。



サイズ：220×80×170mm

サービス内容

お悩み相談

ストーマ装具やストーマケア、生活のこと、どこに相談したらいいのかわからないなど、ストーマに関するお困りごとをご相談ください。コンバテックme+™クラブの皮膚・排泄ケア認定看護師が、状況をお聞きした上で、解決に向けてお手伝いをいたします。

こんなお悩みや質問・疑問のご相談にお応えします。



ストーマ装具の使い方がわからない...

ストーマケアやストーマ周囲のお手入れ方法

排泄物の漏れについて

趣味や旅行、ニオイ対策や入浴など日常生活について

ストーマケア製品の購入先を紹介して欲しい。違う製品も試してみたい

社会福祉制度について詳しく知りたい

ご相談スタイルは3通り

電話・メール・テレビ電話の3通りがございます。
お好みのスタイルをお選びください。



ストーマケアに関するメールマガジン

コンバテックme+™クラブ通信

毎月1日・15日に配信

冬場の衣類の工夫や、入浴時の工夫など、お役立ち情報を定期的にメールで配信いたします。



よくある質問と回答を紹介

知恵袋

皆様からよくいただくストーマケアに関する質問に、皮膚・排泄ケア認定看護師の回答を合わせてご紹介。また生活、ストーマケア、製品などについての様々な内容を動画で分かりやすくご確認いただけます。



生活

ストーマケア

製品

わかりやすい動画を見ながらエクササイズ！

me+™リカバリーの動画

入院中から始められるストーマ保有者のために開発されたエクササイズを動画で紹介。




【例】ストーマ保有者のためのエクササイズ

24時間、365日利用可能

チャットボット

無料サンプル、製品、ストーマケア、生活、コンバテックme+™クラブなどについて、よくある質問に人工知能AIがお応えします。営業時間内は担当者がライブチャットで対応できます。

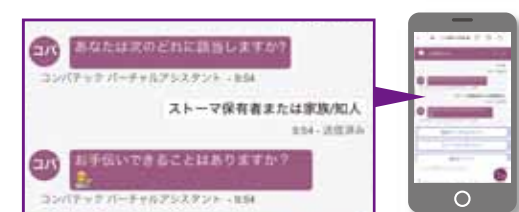

お得な情報をスマートフォンで手軽にチェック！

公式SNS情報発信サービス

インスタグラム、フェイスブックのSNSチャネルにおいて最新イベント情報やキャンペーン情報を配信しております。スマートフォンやタブレット端末からでもお気軽にアクセスしてみてください。



ストーマ保有者のための最新イベント情報やキャンペーン情報を配信しており、ストーマケアに役立つ知識なども配信しております。ぜひフォロー頂きお役立ち情報をチェックください！



インスタグラム



convatec_japan



フェイスブック



コンバテック



ストーマの状態に合う装具選びのお手伝い。スマートフォンで簡単に。

コンバテック装具選択ガイド

ストーマとストーマ周囲の評価項目の設問に沿って入力を進めると、オススメ候補とされるストーマ装具の特長などの情報が表示されます。皆さまの日々のケアや、装具選択の参考としてお役立ていただければ幸いです。お気軽にご利用ください。



スタート！
※画像は2022年版です。

腹壁の硬さは？

ストーマの高さは？

腹壁の状態は？



しわは？

しわは伸ばせるか？

おススメの装具

ご利用無料！
使い方もカンタン！

分かりやすいイラスト入りの画面。「腹壁の硬さ」や「ストーマの高さ」などをタップしていくと、オススメ装具が表示されます。サンプルリクエストにアクセス可能。



アクセスは
こちらから

次のページでも簡単に装具選択の一覧をご覧いただけます。






- 1

ストーマの高さ
- 2

腹壁の硬さ

2本の指で垂直にストーマ周囲4cm以内の腹壁を押し、沈み込みを見る

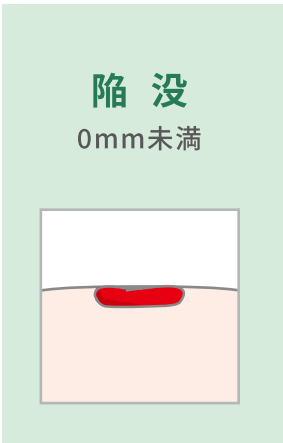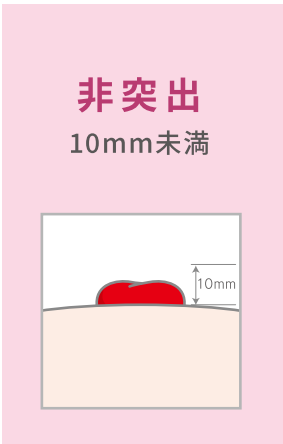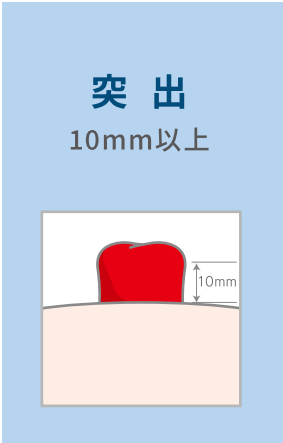

対象装具			
単品系装具		二品系用面板 ※別途ストーマ袋が必要です。	
消化管用	尿路用	固定型	浮動型
1,2	軟性凸面型 P.26、27	軟性凸面型 P.28	軟性凸面型 P.28
	平面型 P.29、30	平面型 P.32、34	平面型 P.36
3	軟性凸面型 P.26、27	軟性凸面型 P.28	軟性凸面型 P.28
	硬性凸面型 P.31	硬性凸面型 P.34	硬性凸面型 P.37
4	軟性凸面型 P.26、27	軟性凸面型 P.28	軟性凸面型 P.28
	平面型 P.30	平面型 P.32、34	平面型 P.36
5	軟性凸面型 P.26、27	軟性凸面型 P.28	軟性凸面型 P.28
		平面型 P.34	硬性凸面型 P.37
6,8	軟性凸面型 P.26、27	軟性凸面型 P.28	硬性凸面型 P.41
	硬性凸面型 P.31	硬性凸面型 P.34	硬性凸面型 P.37
7	軟性凸面型 P.26、27	軟性凸面型 P.28	硬性凸面型 P.37
9	硬性凸面型 P.31	硬性凸面型 P.34	硬性凸面型 P.41

コンバテックの皮膚保護剤

コンバテックの皮膚保護剤は4種類です。目的に応じて、使い分けていただくことができます。

肌に優しい	バリケア® (CPGb系¹⁾／CPB系²⁾) ● 短期交換でも剥離刺激が少なく、皮膚に優しく安心です。 ● 水分を素早く吸収してゲル化するため、湿った皮膚にも粘着します。	
	やわらか皮膚保護剤 (CPGbs系¹⁾／CPBS系²⁾) ● 初期粘着が非常に優れ、素早く皮膚に密着します。	
	デュラプラス® (CPs系¹⁾／CPS系²⁾) ● 皮膚に優しく、耐久性、密着性、柔軟性にも優れています。 ● 初期粘着に優れ、腹壁にしっかりフィットします。	
耐久性が高い	デュラヘーシブ® (CPGbs系¹⁾／CPBS系²⁾) ● 水様性排泄物のストーマ(イレオストミーやウロストミー)に最適です。 ● 水分を吸収して膨潤し、ストーマとの隙間を埋めて、排泄物のもぐり込みを防ぎます。	

1) ストーマ・排泄リハビリテーション学用語集 第4版. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会編. 東京, 金原出版. 2020. p151, 164-165.
2) 吉川隆造. 最近の皮膚保護剤について組成的分類表の作成. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌. Vol.2, No.2, JUN2007.p.3-7

コンバテックの面板の構造・形状

単品系

面板の形状

種類: 平面型、軟性凸面型、硬性凸面型

主な製品:



エスティーム™ モルダブル
(平面型)



やわらか凸
(軟性凸面型)



エスティーム™ CVX
(硬性凸面型)

二品系

フランジの構造



浮動型フランジ
面板から浮き上がっているフランジです。



固定型フランジ
面板に固定されているフランジです。

面板の構造



全面皮膚保護剤タイプ
全面に、皮膚保護剤を使用している肌に優しいタイプです。



外周テープ付タイプ
皮膚保護剤の外周に、テープを使用しており、腹壁に沿って密着します。



アクリルテープ
耐久性に優れ、かつ通気性の高いテープです。



ハイドロテープ
肌に優しいハイドロコロイドをベースにしたテープです。

面板の形状

種類: 平面型、硬性凸面型

主な製品:



ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®
(平面型)



ナチュラ™ Cフランジ
(硬性凸面型)



モルダブルシリーズ

新 新設計のストーマ袋

新設計ストーマ袋は、ストーマケアに携わる医療従事者と400名以上のオストメイト、計1,000名以上から意見を聞いて研究を重ね、開発されました。高性能かつ

今まで以上に使いやすくなった新設計のストーマ袋で、確かな安全性と快適性を皆さまに実感していただけたと思います。

1 新フィルター

高性能なメンブレンフィルターを採用。さらにフィルター位置を上部へ移動することで、より詰まりにくくなり、高い消臭効果を発揮。入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルターシールを貼付してください。



2 新形状・新素材


快適性に優れ、目立ちにくい、流線型デザイン。高い速乾性と、衣ずれ音がしにくい快適素材の不織布。



※フィルターシール貼付時


3 折りたためる

収納ポケットに垂れた排出口を隠すことができ、鼠径部にあたりません。安全性と快適性が向上しました。

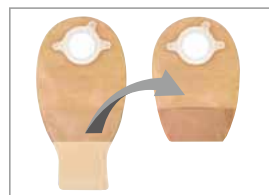

4 排出が簡単

排出口が広くなり、排出が手早く簡単に。改良型ストーマ袋には新たに指をそえるくぼみを追加。さらに使いやすくなりました。

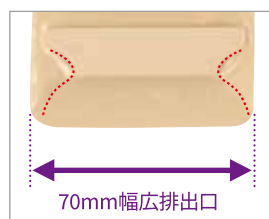

70mm幅広排出口




※写真は改良型ストーマ袋

ストーマ袋の素材

5層の積層プラスチックフィルムが、ニオイや水分を漏らしません。

排泄物を蓄え、ニオイや水分を漏らさず、外部からの衝撃に対する強度があります。
(厚さ:消化管用 0.075mm、尿路用 0.100mm)

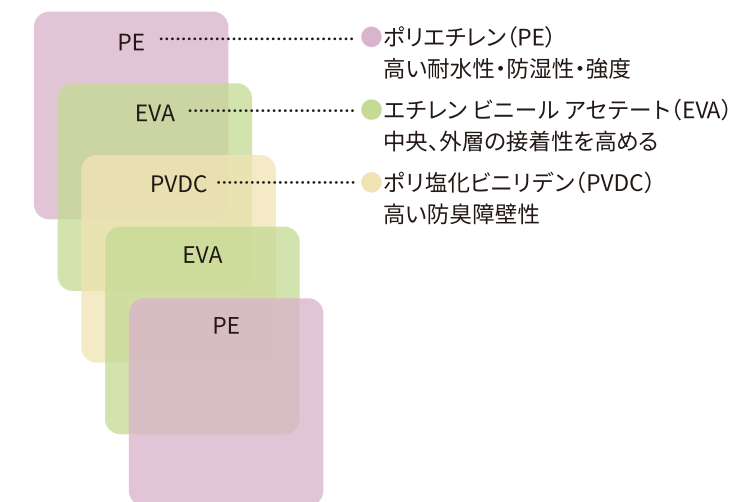


ストーマ袋は透明タイプと肌色タイプの2種類があります。

コンバテック独自のメンブレンフィルター※

ニオイと膨らみを抑え快適な生活を送れる
コンバテック独自のメンブレンフィルター※。

フィルターの目詰まりや漏れの心配がより軽減されました。
入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルターシールを貼付してください。

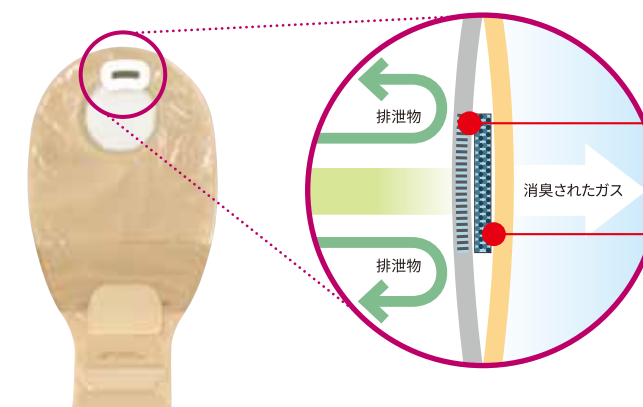

メンブレン (液体遮断性の高い膜)

メンブレンが排泄物をブロック、ガスだけを透過します。排泄物によるフィルターの目詰まりや漏れの心配がありません。

高性能フィルター

ニオイの元となる有機臭や硫化水素に優れた消臭効果があります。

※メンブレンフィルターはフィルター付のドレインパウチ (インビジクローズ®を含む) に付いているフィルターです。イレオストミーパウチに付いているフィルターは防臭フィルターです。

やわらかシリーズ

	消化管	イレオストミー	尿路
Soft 凸の高さ 4mm やわらかく、 しなやかな 面板	 エスティーム™ やわらか凸 シャロー	 やわらか凸 シャロー イレオ	 エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ
Flexible 凸の高さ 7mm 程よいコシと 硬さのある 面板	 エスティーム™ やわらか凸	 やわらか凸 イレオ	 エスティーム™ やわらか凸 ウロ
平面 有効径 60mm 術直後から 様々なニーズに 適応	 やわらか平面 イレオ		

4mm、7mm、それぞれの面板が実現する 安心のケアへの導き

2つの面板特性が術直後や退院・社会復帰までのストーマや腹壁の変化にも対応し、適正に合わせた選択を可能にします。

術直後

4mm、7mmそれぞれの硬さによる適切な押さえで、漏れを防ぐ

早期退院に向けて


追加補正などの手間を省くことのできるシンプルケアの実現

退院・社会復帰後


ストーマや腹壁、また活動量など退院後の変化による漏れの予防的ケアに最適

やわらか凸 シャロー シリーズ

薄く、よりしなやかに軽い押さえの4mm

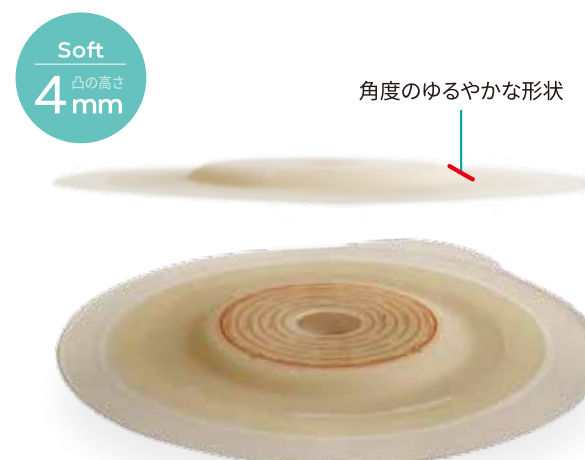

やわらかく、しなやかな面板による“軽い押さえ”が、浅い皺やくぼみを幅広く補正

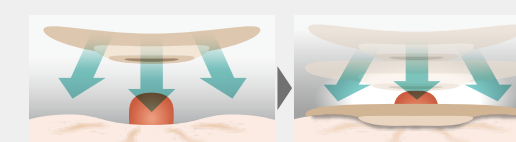


適応となる腹壁、およびストーマの条件

腹壁の硬さ	普通または硬い腹壁
腹壁の形状	山型または平坦か、軽い陥凹がある
腹壁の厚さ	薄い腹壁から厚みのある腹壁まで
皺、皮膚のたるみ	引き延ばせる浅い皺や軽いたるみがある
ストーマの高さ	非突出～突出

やわらか凸 シリーズ

やわらかいのにコシがある押さえの効く7mm

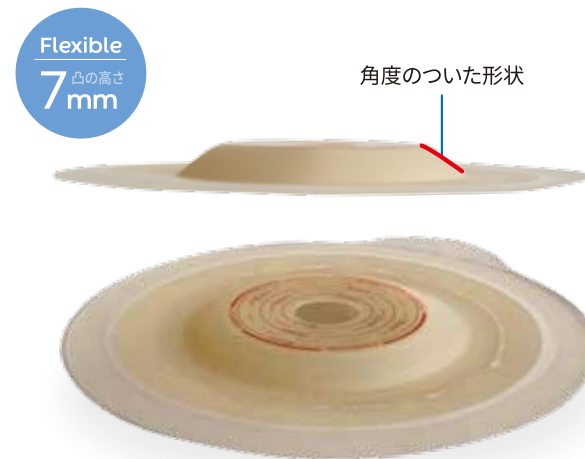

程よいコシと硬さにより、深めの皺やくぼみのあるストーマ近接部をしっかりと補正



適応となる腹壁、およびストーマの条件

腹壁の硬さ	普通またはやわらかい腹壁
腹壁の形状	ストーマ基部に陥凹がある
腹壁の厚さ	厚みのある腹壁
皺、皮膚のたるみ	引き延ばせる軽いたるみか軽いオーバーハングがある
ストーマの高さ	陥没～突出

初期タックの良さ、密着性・追従性に優れた「やわらか皮膚保護剤(CPGbs系¹⁾／CPBS系²⁾)」

優れた密着性(タック力)

初期の密着性など、タック力が高い

- 貼付直後より、刺激性の高い水様便から皮膚を守ります
- ストーマ近接部にすばやく密着し、漏れを防ぎます
- 高いタック力は、山型の腹壁、深い皺、臍部などにも、浮き上がりを防ぎ密着します
- 優れた初期タックで素早く皮膚に密着します。また、優れたpH緩衝能、吸水能、そして膨潤性能で、排泄物から皮膚を守ります

※主成分はベクテン、ゼラチン、CMC、PIB、SIS



スーパースリムフィット構造

薄さと密着性を両立した、皮膚保護剤辺縁部

- 薄さと密着性の高さは、辺縁部の捲れ上がりを防ぎます
- 薄さを生かし、身体の動きに対しても高い追従性を発揮します
- 面板外縁断端の摩擦を軽減します



1) ストーマ・排泄リハビリテーション学用語集 第4版. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会編. 東京, 金原出版. 2020. p151, 164-165.
2) 吉川隆造. 最近の皮膚保護剤について組成的分類表の作成. 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会誌. Vol.2, No.2, JUN2007.p.3-7

簡便な操作性とお使いになる方の立場に立って工夫、開発された様々な製品特長

消化管用



エスティーム™
やわらか凸 シャロー



エスティーム™
やわらか凸

不織布

ストーマ袋の両面に、やわらかく撥水性に優れた不織布を採用。

スリット(観察窓)

ストーマを観察しながら装具貼付が可能です。貼付後もストーマや排泄物の状態を確認できます。


ベルトタブ

より固定力が必要な際は、ベルト装着が可能です。装具の安定した装着感を高め、安心感を提供します。アクティブな方にもおすすめです。

消臭フィルター


半透過性膜のメンブレンがガスのみ透過させ、水分の透過を防ぎます。

●フィルターの断面図

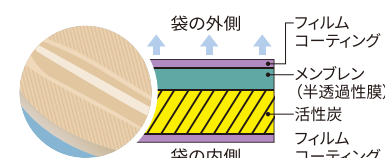

フィルター保護構造

ストーマ袋の中を多層構造化し、便汁からフィルターを保護します。ストーマ袋の中に仕切りのフィルムが1枚あり、S字の切れ込みからガスが通過します。

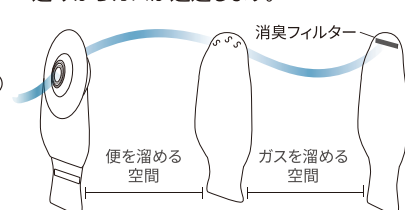

セーフシール排出口

気密性と耐久性に優れたセーフシール排出口を採用。排出口を留めるためのフラップを排出口の上部に配置。内寸が約60mmなので、コロストミーの方のみならずイレオストミーの方にも、しほり出しやすい排出口です。




やわらか凸 イレオ および やわらか凸 シャロー (消化管用)
医療従事者の発売時、使用評価アンケートより一部抜粋

Q 皮膚保護剤の密着性・追従性はいかがでしたか？


約95%以上の方が、
密着性・追従性が「良い」と回答

Soft
凸の高さ
4mm
やわらか凸 シャロー
(消化管用)

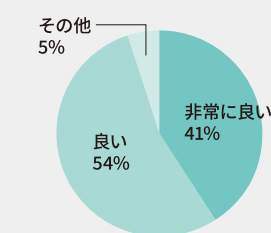

アンケート採取期間:
2019年1月～2019年4月迄
(n=167)

Flexible
凸の高さ
7mm
やわらか凸 イレオ

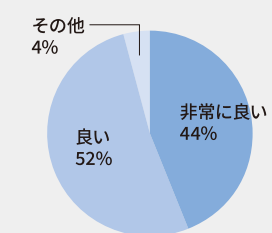

アンケート採取期間:
2017年10月～2018年2月迄
(n=146)

イレオストミー



やわらか平面
イレオ

やわらか凸
シャロー イレオ

やわらか凸
イレオ

不織布

ストーマ袋の両面に、やわらかく撥水性に優れた不織布を採用。

スリット（観察窓）

ストーマを観察しながら装具貼付が可能です。貼付後もストーマや排泄物の状態を確認できます。

ベルトタブ


より固定力が必要な際は、ベルト装着が可能です。装具の安定した装着感を高め、安心感を提供します。アクティブな方にもおすすめです。

消臭フィルター

半透過性膜のメンブレンがガスのみ透過させ、水分の透過を防ぎます。

フィルター保護構造

ストーマ袋の中を多層構造化し、便汁からフィルターを保護します。ストーマ袋の中に仕切りのフィルムが1枚あり、C字の切れ込みからガスが通過します。

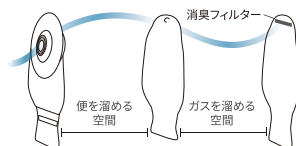


イレオストミーに適したキャップ式排出口の4つの利点

簡便な排出
やわらかい大口径（11mm）
キャップ式排出口


ミルキングしやすい
排出口上部の幅が、
40mmと
ワイド設計

衛生的
周りをクルッと
拭き取れる
排出口

つまみやすい
厚さ9mm、
滑りにくいくびれ形状
のキャップ

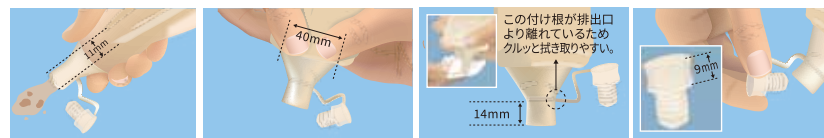

4mm、7mm共に、ドレーナブルパウチの設定があるので、
面板の形状を変えずに 排泄物の性状によって、排出口を選択できます。

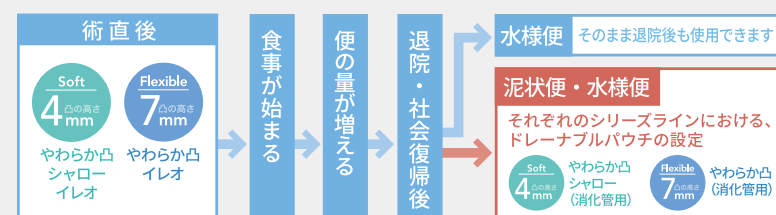

尿路用



エスティーム™
やわらか凸 シャロー ウロ

エスティーム™
やわらか凸 ウロ

不織布

ストーマ袋の両面に、やわらかく撥水性に優れた不織布を採用。

スリット（観察窓）

ストーマを観察しながら装具貼付が可能です。貼付後もストーマや排泄物の状態を確認できます。

ベルトタブ


より固定力が必要な際は、ベルト装着が可能です。装具の安定した装着感を高め、安心感を提供します。アクティブな方にもおすすめです。

逆流防止弁


ストーマ袋内の尿がストーマに向かって逆流せず、逆行性感染を防止します。

やわらか凸 シャロー 尿路用 排出口

逆円錐形の排出口

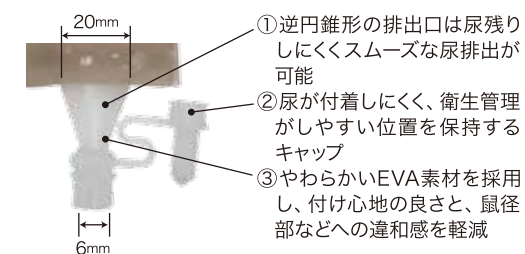


容易な接続ソメ付きタイプの接続管

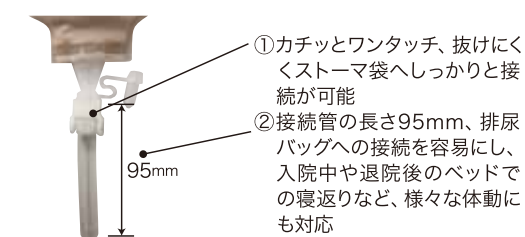

やわらか凸尿路用排出口

尿が漏れない、確実閉鎖が可能な設計。

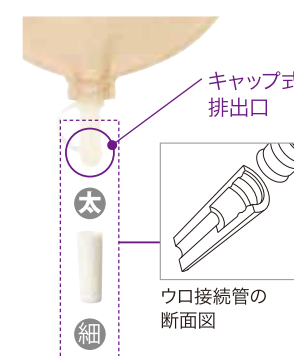




コンバテック モルダブル テクノロジー™


クルクルと巻き広げるだけ。
ハサミ要らずのサイズ合わせ。
ストーマに簡単フィットします。



単品系、二品系いずれにも装備

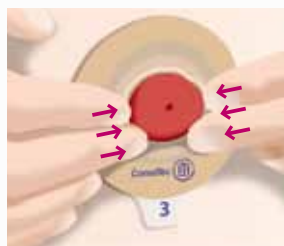

単品系

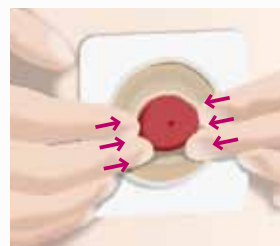

二品系

ディスクの中心に指を添え、
ストーマの形に合うように
中心から外側へ向かって
巻き広げます。

モルダブルディスクを貼付。
隙間が残らないよう、
巻き広げた皮膚保護剤を
ストーマ方向に戻します。

装具選択で重要な点は、漏れない、皮膚障害を起こさないこと

ストーマ近接部の皮膚に
面板を安定して
密着させること

ストーマ近接部へ
しっかり“フィット”し、
隙間を作らないこと

腸蠕動で変化する
ストーマサイズに、常に
柔軟に対応できること

モルダブルは日々変化するストーマサイズへ自然にフィットし、
常に隙間の無い状態を保つことができる

上記3つの必要因子に、全て対応可能なのが


コンバテックのモルダブル テクノロジー™

モルダブル テクノロジー™の特長

特長1

指で成形、 ハサミは不要

皮膚保護剤を指で巻き上げて成形すること
で、さまざまな形状やサイズのストーマに
対応可能。正確にストーマサイズを測る必
要も、ハサミを使う必要もありません。

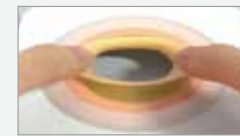

特長2

リバウンディング メモリー™

皮膚保護剤が自然に巻き戻り、
日々変化するストーマにも隙間
をつくりません。



特長3

タートルネック 作用

水分に触れると皮膚保護剤部分が膨潤し、
タートルネックのようにストーマ近接部に
フィットし、より強力に隙間を塞ぎます。




※ご使用前にストーマの高さ、形状をご確認ください。特に高さは最も低い時で5mm以上は必要とします。

装着までのタイムトライアルを実施！

コンバテック モルダブル テクノロジー™面板の使いやすさを実感していただくため
に、医療従事者の方に使用していただき、タイムトライアルを実施しました。

手順) コンバテック モルダブル テクノロジー™面板(A)、カスタムカット面板(B)のどちらかを選択いただき、(A)は楕円型、
(B)は正円型のストーマ模型にそれぞれ貼付し、タイムトライアルを実施。 ※同一性能を持った二品系装具での計測

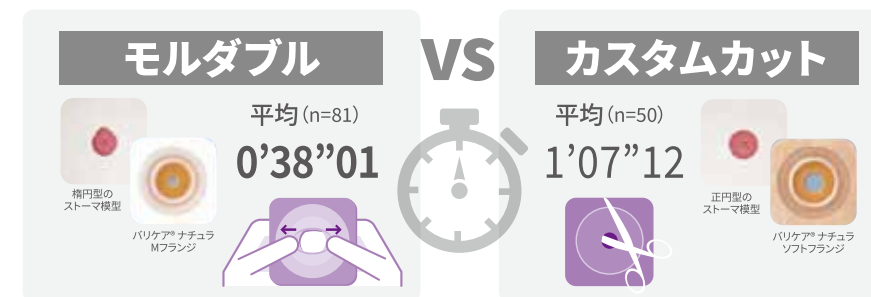

経験に左右されない装着のしやすさが証明されました。


モルダブルを 使用する有用性

時間、手間の削減

排泄物の付着から
皮膚を保護

ストーマサイズの
変化に対応し
漏れのリスク低減

モルダブルディスクの構造

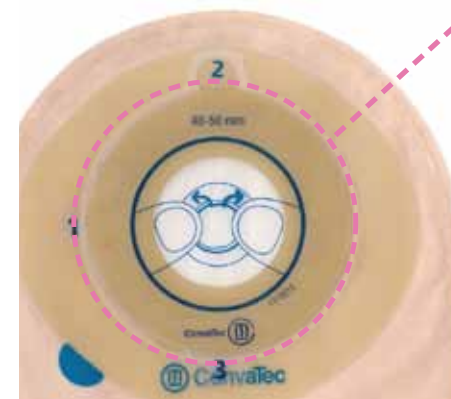

モルダブルディスク (円盤状皮膚保護剤) 断面図

皮膚保護剤: デュラヘーシブ® 高い耐久性
ポリエチレンフィルム 特殊加工: エンボス
皮膚保護剤: パリアケア® 高い皮膚保護性

皮膚

ストーマの高さと 形状について



ストーマの高さが
最も低い時で
5mm以上



ストーマの形状は
円柱型または
マッシュルーム型

お客様の声

装着時のストーマへの負担の無さは感動ものでした！



画期的な製品だと思います。面板がストーマ部分に
フィットするので、漏れが全く無く、剥がした時もき
れいでした。



貼りやすく、装着の手間が
無く、とても楽だった。漏
れや、剥がれ等、装着後に心配するこ
とも無く安心して使用できた。スト
ーマの状況(腫れ気味)も良くなった。





ナチュラ™

アコーディオン® シリーズ

リフトアップ機能で、嵌合圧をおなかにかけずに手で受ける、浮動型面板



③

②


①

操作性の高いリフトアップ機能と持ちやすいソフト・リム

- ① 透明の蛇腹(リフター)が上方に伸展することで、指の第一関節(個人差があります)まで入るスペースを確保。
- ② フランジの直下まで指が入るためパウチとの嵌合が容易。
- ③ 広く持ちやすいソフト・リムは、セルフケアできる方、ケアする方、双方が操作しやすいデザイン。

アコーディオン® シリーズの特長

指が入るスペースが確保され持ち上がるので、お腹への嵌合圧が軽減。

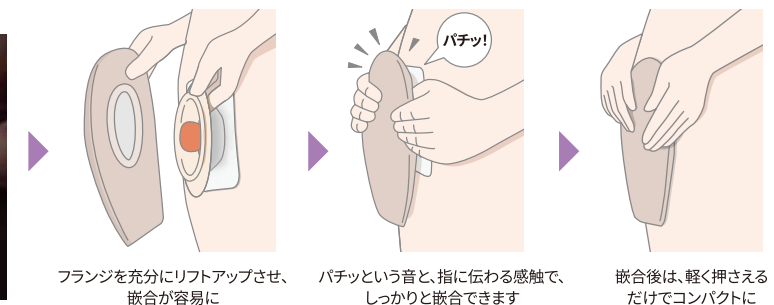

誰にでも扱い易く、装着も安心!



面板はフィット+フランジは水平
ニューフローティング

面板が腹壁の形状に合わせて屈曲してもフランジは独立して水平を保ちます。山型のおなかやヘルニアの方にも反発せずしっかりフィットします。




“パチッ”の音でしっかり装着確認
スナップロック式嵌め込み式

嵌合の際、パチッという音と感触で確認でき、誰にでも扱いやすく簡単なため安心して装着できます。ライフスタイルや用途に合わせて豊富なラインアップのナチュラ™シリーズのストーマ袋を選択することができます。



グリップが効くワイドスペース
ソフト・リム


着脱の際に指を沿える(つまむ)スペースが十分にあり、巧緻性の低い方、視力の弱い方でもグリップが効きます。ソフトな素材で指先に「あたり」が優しいデザインとなっています。

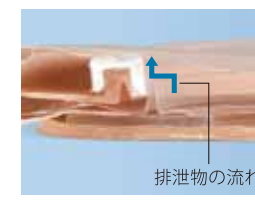

リフターが清潔な状態を保つ
防汚機能

リフターが防汚壁となりフランジとストーマ袋の嵌合部に排泄物が潜り込むのを防ぎます。クリーンで快適な状態を保ちます。

医療従事者の皆様に二品系装具を選択する理由を聞いてみました

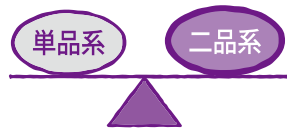ストーマを直視しながら貼付できる ● 面板を正確な位置へ貼付でき、漏れやスキントラブルの低減 ● パウダー散布など処置が簡単 	高さのある浮動型は安心 ● 指がしっかり入るため、ストーマ袋の着脱やガス抜きが容易 ● リム(持ち手)が広く持ちやすいことは、腹圧を掛けずに交換が可能 ● 嵌合がし易い構造は、セルフケアの方、介助者の方にもやさしい 	トータルコストの低減に ● 単価でなくランニングコストで比較が重要 ● 長期貼付で単品系と同等以上のケースも望め、コストを抑えた運用も可能 単品系 二品系  例) 面板: バリケア® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン® ストーマ袋: ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ ※1回の貼付に掛かる金額: 面板 700円 + ストーマ袋 372円 = 1,072円 (単価) 1ヶ月間の使用金額目安 7,504円 (4日間貼付×7回/月)
貼付期間を長くしたい場合に ● 耐久性が高い保護剤を選定する事で、装具交換の頻度と労力の低減 ● 短期交換などによる脆弱な皮膚への剥離刺激の低減 	状況に合わせたストーマ袋の選択が可能 ● 面板種類を変えずに、便性に合わせたストーマ袋へ変更が可能 ● お出掛け時はコンパクトサイズへ変更など、TPOに合わせたストーマ袋の選択 	

平面型2種&凸面の3タイプから選べます。

ハサミ不要!
平面
(自在孔)



モルダブル テクノロジー™

隙間なく、漏れも少ない優れた皮膚保護剤がストーマ近接部に強力に保護します。

指で成形、ハサミは不要

ハサミ不要でストーマサイズに自由に成形できます。



リバウンディングメモリー™

皮膚保護剤がストーマに向かって逆戻りし、日々変化するストーマとの隙間を作りません。



タートルネック作用

シーリング効果が高くストーマ近接部の保護能力に優れています。

豊富なサイズ!
平面
(自由開孔)



カスタムカット

ストーマサイズに合わせて皮膚保護剤をカットします。13mm~45mmまでのストーマサイズに対応可能なラインアップ。45mm・57mm・70mm、3つのフランジサイズで豊富なバリエーション。

フランジサイズ	有効径
45mm	13~21mm
57mm	13~33mm
70mm	13~45mm


※モルダブルはフランジサイズ45mmはありません。

しっかり押さえる!
コンベックス
(硬性凸面型)



セキユア6.65

“6.65mm”のミッドレンジの程よい高さでユニークな凸面形状がストーマを押し出し、近接部を押さえ、皺やくぼみを補正して漏れを防ぎます。

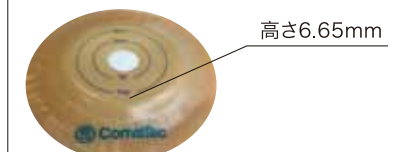

One Piece

単品系ストーマ装具

面板とストーマ袋が一体となった単品系ストーマ装具

- やわらかシリーズ
やわらかさは「快適」のために、コンは「安心」のために
- エスティーム™ シリーズ
より使いやすくなった新設計ストーマ袋を採用
- アクティブライフ® シリーズ
さまざまなストーマに対応・装着はシンプルで簡単



単品系ストーマ装具

やわらかシリーズ

エスティーム™ やわらか凸 シャロー
エスティーム™ やわらか凸
やわらか凸 シャロー イレオ
やわらか凸 イレオ
やわらか平面 イレオ
エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ
エスティーム™ やわらか凸 ウロ

消化管用下部開放型

軟性凸面型 (全面皮膚保護剤)

エスティーム™ やわらか凸 シャロー (消化管用)



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 4mmの薄さ、そして圧をかけすぎないゆるやかな角度
- 折りまげることも可能な面板は、ストーマ直視下での容易な貼付が可能
- 軽く押さえの効く、しなやかな面板は、着け心地よく、さまざまな腹壁に密着・追従
- スリット入

カスタムカット (クリップ*21個付)


注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
422365	肌色*1	10mm	28mmまで	S	10枚	8,480円
422364		15mm	40mmまで	M		
422363		20mm	47mmまで	L		

※非課税

プレカット (クリップ*21個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
422545	肌色*1	25mm	40mmまで	M	10枚	8,480円
422546		30mm	40mmまで	M		
422547		35mm	40mmまで	M		
422542		40mm	47mmまで	L		
422543		45mm	47mmまで	L		

※非課税

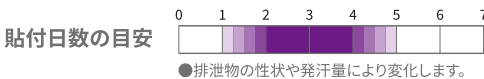

- *1: スリット (観察窓) 付き
- *2: 排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

エスティーム™ やわらか凸 (消化管用)



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいののにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型嵌め込み具がストーマ近接部を押さえます
- スリット入

カスタムカット (クリップ*21個付)


注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421619	肌色*1	20mm	30mmまで	M	10枚	9,010円
421615		20mm	40mmまで	L		
422159		20mm	55mmまで	XL		

※非課税

プレカット (クリップ*21個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421621	肌色*1	30mm	30mmまで	M	10枚	9,010円
421617		30mm	40mmまで	L		
421618		35mm	40mmまで	L		

※非課税

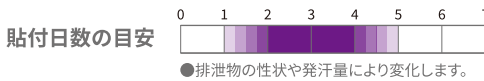

- *1: スリット (観察窓) 付き
- *2: 排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

キャップ式 イレオストミー用

軟性凸面型 (全面皮膚保護剤)

やわらか凸 シャロー イレオ



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 4mmの薄さ、そして圧をかけすぎないゆるやかな角度
- 折りまげることも可能な面板は、ストーマ直視下での容易な貼付が可能
- 軽く押さえの効く、しなやかな面板は、着け心地よく、さまざまな腹壁に密着・追従
- スリット入

カスタムカット (クリップ*21個付)


注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
423513	肌色*1	10mm	28mmまで	S	10枚	8,270円
423512		15mm	40mmまで	M		
423511		20mm	47mmまで	L		

※非課税

プレカット (クリップ*21個付)


注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
423516	肌色*1	25mm	40mmまで	M	10枚	8,270円
423517		30mm	40mmまで	M		
423518		35mm	40mmまで	M		
423514		40mm	47mmまで	L		
423515		45mm	47mmまで	L		

※非課税

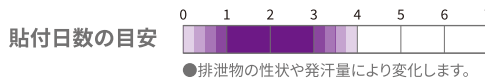

- *1: スリット (観察窓) 付き
- *2: 排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

やわらか凸 イレオ

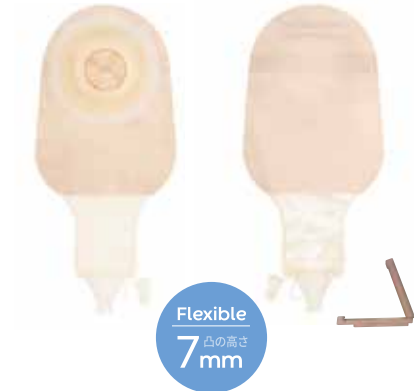


- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいののにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型嵌め込み具がストーマ近接部を押さえます
- スリット入

カスタムカット (クリップ*21個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421937	肌色*1	15mm	20mmまで	S	10枚	8,270円
421936		15mm	30mmまで	M		
421935		15mm	40mmまで	L		

※非課税

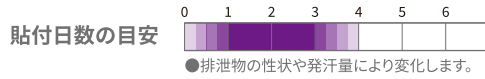

- *1: スリット (観察窓) 付き
- *2: 排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

平面型 (全面皮膚保護剤)

やわらか平面 イレオ




- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 60mmまでのストーマに対応し、術直後から使用できます
- スリット入

カスタムカット (クリップ*21個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421934	肌色*1	20mm	60mmまで	10枚	7,420円

※非課税

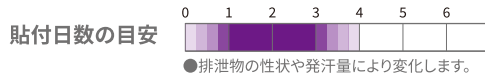

- *1: スリット (観察窓) 付き
- *2: 排出口をクリップで留めたい場合に使用ください。

尿路用

軟性凸面型(全面皮膚保護剤)

エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ(尿路用)



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- 4mmの薄さ、そして圧をかけすぎないゆるやかな角度
- 折りまげること可能な面板は、ストーマ直視下での容易な貼付が可能
- 軽く押さえの効く、しなやかな面板は、着け心地よく、さまざまな腹壁に密着・追従
- 逆流防止弁付、スリット入

カスタムカット(アダプター*2個付)



注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
422551	肌色 ^{*1}	20mm	47mmまで	L	10枚	10,070円


※非課税

プレカット(アダプター*2個付)



注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
422563		15mm	28mmまで	S	10枚	10,070円
422564		20mm	28mmまで	S		
422565	肌色 ^{*1}	25mm	28mmまで	S		
422560		30mm	40mmまで	M		
422561		35mm	40mmまで	M		

※非課税

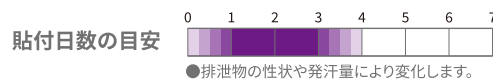

- *1:スリット(観察窓)付き
- *3:導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

エスティーム™ やわらか凸 ウロ(尿路用)



- 素早い密着力と高い皮膚保護性能の「やわらか皮膚保護剤」を使用
- やわらかいののにコシがある凸面型面板が漏れと違和感を軽減
- 3つのサイズの凸型嵌め込み具がストーマ近接部を押さええます
- 逆流防止弁付、スリット入

カスタムカット(アダプター*2個付)



注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421628		10mm	18mmまで	S	10枚	10,600円
421626	肌色 ^{*1}	10mm	30mmまで	M		
421623		10mm	40mmまで	L		


※非課税

プレカット(アダプター*2個付)



注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	リングサイズ	入数	本体価格※
421625	肌色 ^{*1}	20mm	40mmまで	L	10枚	10,600円

※非課税

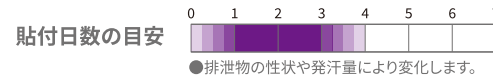

- *1:スリット(観察窓)付き
- *3:導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

単品系ストーマ装具

エスティーム™ シリーズ

さらなる安心感とライフスタイルに合わせた快適性。

エスティーム™とは“尊重・尊厳”を意味します。ストーマ保有者の意見を尊重したストーマ袋で、ストーマ保有者の皆さまの尊厳を保つため、さらなる安心感と快適性をお届けします。消化管ストーマの方の短期交換から中長期交換が可能なタイプまで、ニーズに合わせてお選びいただけます。



消化管用下部開放型

平面型(全面皮膚保護剤)

エスティーム™ モルダブル



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 付属のモルダブルディスクが巻き戻り、ストーマ近接部を強力に保護
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 肌色タイプはストーマが見えるウィンドウ付



モルダブル

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
413515		M	21~30mm	10枚	5,830円
413516	透明	L	31~40mm		
413517		XL	41~50mm		
413521		M	21~30mm	10枚	5,830円
413522	肌色	L	31~40mm		
413523		XL	41~50mm		


※非課税

モルダブル



注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
413518		M	21~30mm	10枚	5,730円
413519	透明	L	31~40mm		

※非課税

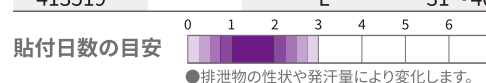

コンバテックのモルダブル テクノロジー™

超高齢社会に向けたストーマケアのために

臨床研究によって証明された確かな皮膚保護効果。自然な巻き戻りで、ストーマ近接部の優しい保護を可能にする「モルダブルテクノロジー™」。これからの超高齢社会に向けて、より快適なストーマケアで、充実の日常生活をサポートします。

消化管用下部開放型

平面型 (全面皮膚保護剤)

エスティム™ インビジクローズ® ドレインパウチ




- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用の薄型面板
- 術直後からの使用が可能
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能

カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416718	透明	20mm	70mmまで	10枚	4,190円
416719	肌色				

プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416724	透明	25mm	25mmまで	10枚	4,190円
416728		30mm	25～30mm		
416732		35mm	30～35mm		
416736		40mm	35～40mm		
416725	肌色	25mm	25mmまで	10枚	4,190円
416729		30mm	25～30mm		
416733		35mm	30～35mm		
416737		40mm	35～40mm		

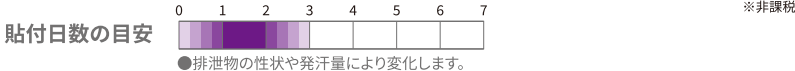

平面型 (外周テープ付)

エスティム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期




- 皮膚保護剤には追従性、耐久性に優れた「デュラプラス®」を使用
- 皮膚粘着面が広い安心タイプのカスタムカットと、一回り小さな面板で使い勝手の良いタイプのプレカットのラインアップをご用意
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能

カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416976	透明	19mm	64mmまで	10枚	6,090円
416975	肌色				

プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421020	透明	25mm	25mmまで	10枚	6,090円
421021		28mm	25～28mm		
421022		32mm	28～32mm		
421023		35mm	32～35mm		
421024		38mm	35～38mm		
421025	肌色	25mm	25mmまで	10枚	6,090円
421026		28mm	25～28mm		
421027		32mm	28～32mm		
421028		35mm	32～35mm		
421029		38mm	35～38mm		

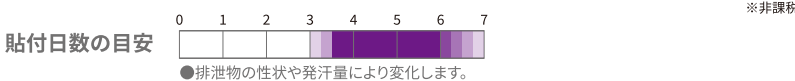

※写真は改良型ストーマ袋

消化管用下部開放型

平面型 (全面皮膚保護剤)

エスティム™ ドレインパウチ




- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- クリップタイプ

カスタムカット
(クリップ2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416717	肌色	20mm	70mmまで	10枚	3,250円

プレカット
(クリップ2個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416723	肌色	25mm	25mmまで	10枚	3,250円
416727		30mm	25～30mm		
416735		40mm	35～40mm		

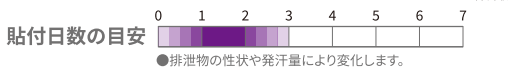

硬性凸面型 (外周テープ付)


エスティム™ インビジクローズ® ドレインパウチ CVX



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- ならかな凸面が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能

プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416738	透明	19mm	19mmまで	10枚	10,070円
416740		22mm	19～22mm		
416742		25mm	22～25mm		
416744		28mm	25～28mm		
416746		32mm	28～32mm		
416748	肌色	35mm	32～35mm	10枚	10,070円
416750		38mm	35～38mm		
416739		19mm	19mmまで		
416741		22mm	19～22mm		
416743		25mm	22～25mm		
416745		28mm	25～28mm		
416747		32mm	28～32mm		
416749		35mm	32～35mm		
416751		38mm	35～38mm		

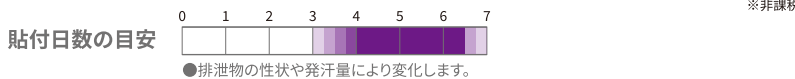

消化管用下部閉鎖型

平面型(全面皮膚保護剤)

エスティム™ クローズパウチ



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 下部閉鎖型ストーマ袋


カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416700	透明	20mm	70mmまで	30枚	8,500円
416701	肌色				



プレカット

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
416703		25mm	25mmまで		
416706	透明	30mm	25～30mm	30枚	8,500円
416712		40mm	35～40mm		
416704		25mm	25mmまで		
416707	肌色	30mm	25～30mm	30枚	8,500円
416713		40mm	35～40mm		

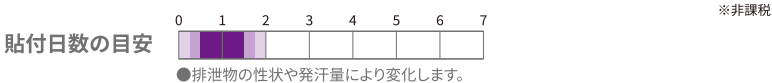


エスティム™ クローズパウチ(コンパクト)



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 入浴やスポーツ時に便利なミニサイズの下部閉鎖型ストーマ袋
- スリット入

カスタムカット

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421816	肌色	20mm	70mmまで	30枚	8,500円

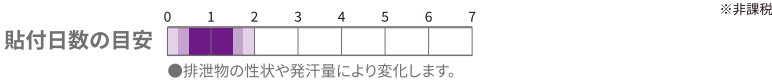

尿路用

平面型(外周テープ付)


エスティム™ ウロ 長期(尿路用)



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 平面装具でありながら、ベルトタブを装備
- 排出口の開閉状態が目視でわかる赤い開閉目印付き回転タップ式排出口
- 逆流防止弁付

カスタムカット(アダプター*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421631	透明	13mm	45mmまで	10枚	8,480円

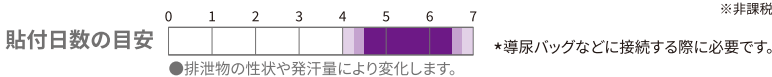

単品系ストーマ装具

アクティブライフ® シリーズ

消化管用下部開放型

平面型(全面皮膚保護剤)


アクティブライフ® ドレインパウチ ST-2



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用
- 術直後からの使用が可能
- クリップタイプ

カスタムカット
(ワイヤークリップ10本、クリップ2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00200	透明	19mm	64mmまで	30枚	8,500円

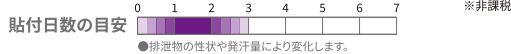

平面型(外周テープ付)


アクティブライフ® ドレインパウチ DX



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- クリップタイプ

カスタムカット
(クリップ1個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
ADD6410	透明	19mm	64mmまで	10枚	4,530円

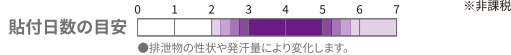

硬性凸面型(外周テープ付)


アクティブライフ® ドレインパウチ CD



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- なだらかな凸が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- クリップタイプ

プレカット
(クリップ1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
ADC1905		19mm	19mmまで		
ADC2205		22mm	19～22mm		
ADC2505		25mm	22～25mm		
ADC2805		28mm	25～28mm		
ADC3205	透明	32mm	28～32mm	5枚	5,100円
ADC3505		35mm	32～35mm		
ADC3805		38mm	35～38mm		
ADC4505		45mm	38～45mm		
ADC5005		50mm	45～50mm		

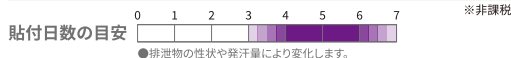

消化管術直後用装具

平面型(全面皮膚保護剤)


アクティブライフ® 術後用パウチ S



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用
- 術直後のストーマケアが容易な幅広のオープンエンドストーマ袋

カスタムカット
(輪ゴム10本付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
APS7010	透明	19mm	70mmまで	10枚	3,400円

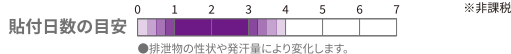

尿路用

平面型(外周テープ付)

アクティブライフ® ウロストミーパウチ(尿路用)



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 尿の排出が簡単な回転式タップを採用
- 回転式タップの赤い印で開閉状態を確認可能
- 逆流防止弁付

プレカット
(アダプター*1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00925		19mm	19mmまで	10枚	10,770円
00926		22mm	22mmまで		
00927	透明	25mm	25mmまで		
00928		28mm	28mmまで		
00929		32mm	32mmまで		


貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。

平面型(全面皮膚保護剤)

アクティブライフ® ユリナパウチ(尿路用)

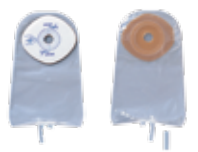

- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用
- かさばらないVパイプ式タップを採用
- 逆流防止弁付

カスタムカット
(アダプター*2個付)

注文番号	色	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
AUP4510	透明	19mm	45mmまで	10枚	9,630円


貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。

硬性凸面型(外周テープ付)

アクティブライフ® ユリナパウチ CD(尿路用)

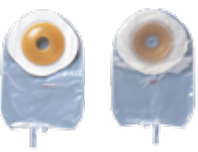

- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- かさばらないVパイプ式タップを採用
- 逆流防止弁付

プレカット
(アダプター*1個付)

注文番号	色	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
AUC1305		13mm	13mmまで	5枚	5,670円
AUC1605		16mm	13～16mm		
AUC1905		19mm	16～19mm		
AUC2205	透明	22mm	19～22mm		
AUC2505		25mm	22～25mm		
AUC2805		28mm	25～28mm		
AUC3205		32mm	28～32mm		
AUC3505		35mm	32～35mm		

貼付日数の目安

●排泄物の性状や発汗量により変化します。

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。

Two Piece

二品系ストーマ装具

面板とストーマ袋を組み合わせる二品系ストーマ装具は、目的に合わせて面板を装着したままストーマ袋のみを交換できます。

- ナチュラ™ アコーディオン® シリーズ
嵌合圧を、おなかにかけずに手で受けるフランジ
- ナチュラ™ シリーズ
豊富な製品ラインアップでさまざまなストーマに対応
- バリケア® オートロック シリーズ
ストーマ袋の角度は装着したまま360度回転可能
- エスティーム シナジー® シリーズ
単品系ストーマ装具のような軽くしなやかな装着感

二品系ストーマ装具

ナチュラTM アコーディオン[®] シリーズ

嵌め込み式 浮動型 面板

平面型 (外周テープ付)

バリケア[®] ナチュラTM Mフランジ アコーディオン[®]




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア[®]」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ



モルダブル

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421030	57mmAS ■	13～22mm	5枚	3,500円
421031	57mmAM ■	22～33mm		
421032	70mmAL ■	33～45mm		

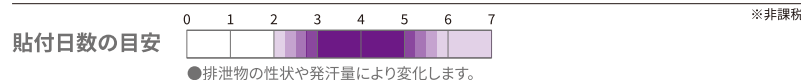

デュラヘーシブ[®] ナチュラTM Mフランジ アコーディオン[®]




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ[®]」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ



モルダブル

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421036	57mmAS ■	13～22mm	5枚	5,000円
421037	57mmAM ■	22～33mm		
421038	70mmAL ■	33～45mm		

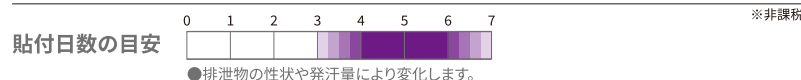

バリケア[®] ナチュラTM ソフトフランジ アコーディオン[®]




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア[®]」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421455	45mm ■	13～21mm	5枚	3,500円
421459	57mm ■	13～33mm		
421463	70mm ■	13～45mm		

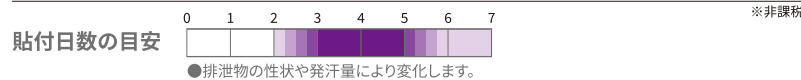

デュラヘーシブ[®] ナチュラTM ソフトフランジ アコーディオン[®]



- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ[®]」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421453	45mm ■	13～21mm	5枚	5,000円
421457	57mm ■	13～33mm		
421461	70mm ■	13～45mm		



嵌め込み式 浮動型 面板

硬性凸面型 (外周テープ付)

デュラヘーシブ[®] ナチュラTM Cフランジ アコーディオン[®]



- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ユニークで新しい凸面形状「セキユア6.65」
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ[®]」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421633	45mm ■	13～22mm	5枚	6,000円
421635	57mm ■	13～35mm		
421637	70mm ■	13～48mm		



デュラヘーシブ[®] ナチュラTM Cソフトフランジ アコーディオン[®]




- フランジ直下まで指が入るため腹圧をかけずストーマ袋との嵌合が容易
- ユニークで新しい凸面形状「セキユア6.65」
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ[®]」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
421632	45mm ■	13～22mm	5枚	6,000円
421634	57mm ■	13～35mm		
421636	70mm ■	13～48mm		

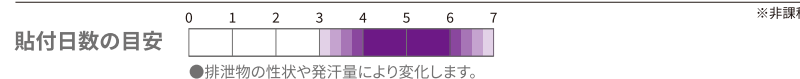

二品系ストーマ装具

ナチュラ™ シリーズ

音と感触で嵌合を確認できるため、いつでも安心。

プラスチックリングを嵌合するスナップロック式を採用。

嵌合の際、パチッという音と感触で確認ができ、扱いやすく手順も簡単なため、安心して装着できます。

豊富なラインアップの中から、ライフスタイルに合わせて製品をお選びいただけます。

嵌め込み式 固定型 面板

平面型 (外周テープ付)

バリケア® ナチュラ™ Mフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00295	45mm	S	13～22mm	5枚	4,700円
00296	45mm	M	22～33mm		
00297	57mm	L	33～45mm		
00298	70mm	XL	45～56mm*		

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。 *XL (00298) の初孔の形は楕円です。

バリケア® ナチュラ™ ソフトMフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
413421	45mm	S	13～22mm	10枚	9,400円
413422	45mm	M	22～33mm		
413423	57mm	L	33～45mm		
413424	70mm	XL	45～56mm*		

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。 *XL (413424) の初孔の形は楕円です。

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00305	45mm	S	13～22mm	5枚	6,230円
00306	45mm	M	22～33mm		
00307	57mm	L	33～45mm		
00308	70mm	XL	45～56mm*		

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。 *XL (00308) の初孔の形は楕円です。

嵌め込み式 固定型 面板

デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトMフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 自然な巻き戻りがストーマ近接部を強力に保護
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
413417	45mm	S	13～22mm	10枚	12,470円
413418	45mm	M	22～33mm		
413419	57mm	L	33～45mm		
413420	70mm	XL	45～56mm*		

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。 *XL (413420) の初孔の形は楕円です。

バリケア® ナチュラ™ ハイドロフランジ



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00246	38mm	17～23mm	5枚	4,700円
00247	45mm	23～30mm		
00248	57mm	30～42mm		
00249	70mm	42～55mm		

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ
- 豊富なプレカットラインアップをご用意

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00261	38mm	17～23mm	5枚	4,470円
00262	45mm	23～30mm		
00263	57mm	30～42mm		

※非課税

プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00320	45mm	16mm	16mmまで	10枚	8,950円
00321	45mm	19mm	16～19mm		
00322	45mm	22mm	19～22mm		
00323	45mm	25mm	22～25mm		
00324	45mm	28mm	25～28mm		
00325	45mm	32mm	28～32mm		
00326	45mm	35mm	32～35mm		

貼付日数の目安 0 1 2 3 4 5 6 7 ※非課税
●排泄物の性状や発汗量により変化します。

嵌め込み式 固定型 面板

平面型 (外周テープ付)


デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ



- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00277	38mm	23mmまで	5枚	5,950円
00278	45mm	23～30mm		
00279	57mm	30～42mm		

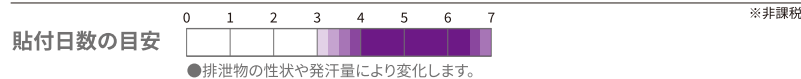

平面型 (全面皮膚保護剤)


バリケア® ナチュラ™ フランジ



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00251	38mm	17～23mm	5枚	4,470円
00252	45mm	23～30mm		
00253	57mm	30～42mm		
00254	70mm	42～55mm	5枚	6,800円
00255	100mm	55～85mm	5枚	7,930円

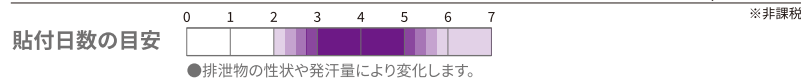


デュラヘーシブ® ナチュラ™ フランジ



- 面板全面に耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用

カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00271	38mm	23mmまで	5枚	5,950円
00272	45mm	23～30mm		
00273	57mm	30～42mm		

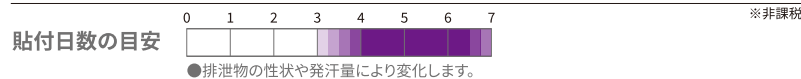

バリケア® ナチュラ™ コンベックスインサート (凸型嵌め込み具)



- バリケア® ナチュラ™の凸型対応マークのある面板に挿入して使用
- 陥没・平坦なストーマの方に

注文番号	対応フランジサイズ	規格 (内径)	ストーマサイズ	入数	本体価格 (税込み)
00391	38mm	S (19mm)	13mm以下	5枚	1,243円
00392	38mm	M (22mm)	13～16mm		
00393	38mm	L (25mm)	16～19mm		
00394	45mm	S (29mm)	19～22mm		
00395	45mm	M (32mm)	22～25mm		
00396	45mm	L (35mm)	25～29mm		
00397	57mm	S (38mm)	29～32mm		
00398	57mm	M (41mm)	32～35mm		

★選択にあたっては、医療従事者にご相談ください。

嵌め込み式 固定型 面板

硬性凸面型 (外周テープ付)


デュラヘーシブ® ナチュラ™ MCフランジ



- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

モルダブル

注文番号	フランジサイズ	初孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00264	45mm	S	13～22mm	10枚	14,510円
00265	45mm	M	22～33mm		
00266	57mm	L	33～45mm		

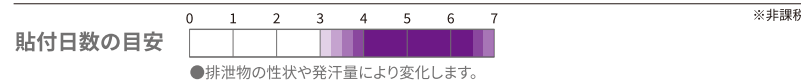

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ



- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- なだらかな凸が皮膚にかかる圧力を均等に分散
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ

プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
00281	45mm	13mm	13mmまで	5枚	7,250円
00282	45mm	16mm	13～16mm		
00283	45mm	19mm	16～19mm		
00284	45mm	22mm	19～22mm		
00285	45mm	25mm	22～25mm		
00286	45mm	28mm	25～28mm		
00287	45mm	32mm	28～32mm		
00288	45mm	35mm	32～35mm		



嵌め込み式 消化管用 ストーマ袋

消化管下部開放型

ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ



※写真は改良型ストーマ袋

- 巻き上げ式のマジックテープで排出口をしっかり閉鎖
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 処理のしやすい幅広タイプの排出口



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
416414	透明	38mm	10枚	3,720円
416416		45mm		
416419		57mm		
416422		70mm		
416415	肌色	38mm	10枚	3,720円
416417		45mm		
416420		57mm		
416423		70mm		

※非課税



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
416418	透明	45mm	10枚	3,220円
416421		57mm		
416424		70mm		
416472		100mm		

※非課税

バリケア® ナチュラ™ ドレインパウチ



- クラシックタイプの下部開放型ストーマ袋
- クリップタイプ



10枚、クリップ2個

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00311	透明	38mm	10枚	3,110円
00312		45mm		
00314		57mm		
00290	肌色	38mm	10枚	3,110円
00291		45mm		
00293		57mm		
00315	透明	70mm	10枚	3,400円
00316	透明	100mm	10枚	4,420円

※非課税



30枚、クリップ2個

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00313	透明	45mm	30枚	8,840円
00292	肌色			

※非課税

嵌め込み式 消化管用 ストーマ袋

キャップ式イレオストミー用

バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ



- イレオストミーや瘻孔のケアに
- 排泄物の性状によりクリップを使った管理も可能
- 逆流防止弁付



クリップ／アダプター*各1個、フィルター5個付


注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
420695	透明	45mm	5枚	3,110円
420696		57mm		
420697		70mm		
00332		45mm		
00333	肌色	57mm	5枚	3,110円
00334		70mm		

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。

※非課税

消化管下部閉鎖型

ナチュラ™ プラス クローズパウチ

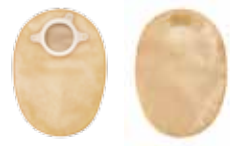

- 下部閉鎖型ストーマ袋
- スリット入



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
421680	肌色	45mm	30枚	7,450円
421682		57mm		

※非課税



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
421681	肌色	45mm	30枚	6,800円
421683		57mm		

※非課税

ナチュラ™ プラス クローズパウチ コンパクト



- 入浴やスポーツ時に便利なミニサイズの下部閉鎖型ストーマ袋
- スリット入



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
421796	肌色	45mm	30枚	7,450円
421797		57mm		

※非課税

嵌め込み式 ストーマ袋

消化管用下部開放型

バリケア® オートロック ドレインパウチ



- クラシックタイプの下部開放型ストーマ袋
- クリップタイプ

クリップ1個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00131	透明	45mm	10枚	3,280円
00133		57mm		
00140	肌色	35mm	10枚	3,280円
00141		45mm		
00143		57mm		

※非課税



消化管用下部閉鎖型

バリケア® オートロック クローズパウチ



- クラシックタイプの下部閉鎖型ストーマ袋
- フィルター付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00137	肌色	45mm	15枚	4,250円
00138		57mm		

※非課税



尿路用

バリケア® オートロック ウロストミーパウチ



- 尿の排出が簡単な回転式タップを採用
- 回転式タップの赤い印で開閉状態を確認可能
- 360度回転するためベッドサイドでの管理が容易
- 逆流防止弁付

アダプター*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00150	透明	35mm	10枚	8,150円
00151		45mm		
00153		57mm		

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

※非課税



バリケア® オートロック ユリナパウチ



- かさばらないパイプ式タップを採用
- 360度回転するためベッドサイドでの管理が容易
- 逆流防止弁付

アダプター*2個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
00146	透明	35mm	10枚	7,590円
00147		45mm		
00148		57mm		

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

※非課税



二品系ストーマ装具

エスティーム シナジー® シリーズ

粘着式カップリング方式で、軽くしなやかな装着感。

嵌合するためのプラスチックリングがなく、腹圧をかけずに装着できます。
単品系ストーマ装具のような軽くしなやかな装着感です。

粘着式 面板

平面型 (外周テープ付)

エスティーム シナジー® ハイドロウェハー



- 皮膚保護剤には肌に優しい「バリケア®」を使用
- 外周テープは肌に優しいハイドロテープ
- 豊富なプレカットラインアップをご用意



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
09105	35mm	35mmまで	5枚	4,810円
09106	48mm	35～48mm		
09107	61mm	48～61mm		

※非課税

プレカット

注文番号	フランジサイズ	既製孔サイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
09111	35mm	25mm	22～25mm	5枚	4,810円
09112	35mm	28mm	25～28mm		
09113	35mm	32mm	28～32mm		
09114	35mm	35mm	32～35mm		
09115	48mm	38mm	35～38mm		



貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

平面型 (全面皮膚保護剤)

エスティーム シナジー® ウェハー



- 面板全面に肌に優しい「バリケア®」を使用



カスタムカット

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
09069	89mm	61～89mm	5枚	4,810円

※非課税

貼付日数の目安



●排泄物の性状や発汗量により変化します。

粘着式 面板

硬性凸面型（自在孔外周テープ付）

エスティーム シナジー® デュラヘーシブ® MCウェハー




- ハサミを使わずに皮膚保護剤を指先でストーマの形に成形可能
- 凸面構造で、陥没・平坦なストーマの方に最適
- 皮膚保護剤には耐久性に優れた「デュラヘーシブ®」を使用
- 外周テープは通気性の高いアクリルテープ



モルダブル

注文番号	フランジサイズ	ストーマサイズ	入数	本体価格※
09075	35mm	13～22mm	5枚	7,590円
09076	48mm	22～33mm		
09077	61mm	33～45mm		

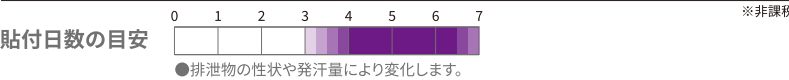

※非課税

粘着式 消化管用 ストーマ袋

消化管下部開放型

エスティーム シナジー® インビジクローズ® ドレインパウチ




- 巻き上げ式のマジックテープで排出口をしっかり閉鎖
- 尾部を折りたたんで付属のポケットに収納可能
- 処理のしやすい幅広タイプの排出口



注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
416795	透明	35mm	10枚	3,620円
416798		48mm		
416901		61mm		
416796	肌色	35mm	10枚	3,620円
416799		48mm		
416902		61mm		

※非課税

エスティーム シナジー® ドレインパウチ ELサイズ

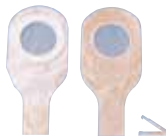

- クリップタイプ

クリップ10個付

注文番号	色	フランジサイズ	入数	本体価格※
09009	透明	89mm	10枚	3,330円

※非課税

For Children

小児用ストーマ装具

大切なお子さまのために、より一層の安心と快適を…。
お子さまのデリケートな肌に優しい小児用ストーマ装具リトルワン™。

小児のストーマケアに携わる、
皮膚・排泄ケア認定看護師よりさまざまなアイデアをいただき、
小児のニーズに合わせて開発しました。
小児の皮膚特性を考慮し、皮膚保護剤は、
すべて肌に優しい「バリケア®」を使用しています。

単品系

消化管用下部開放型 平面型(全面皮膚保護剤)

リトルワン™ ワンピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ

4.5kgまでの
お子さま用



- 保護剤剥離紙にカッティングガイドを印刷
- 巻き上げ式マジックテープタイプ
- 面板サイズ:44×50mm

カスタムカット

注文番号	色	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00820	透明	縦25mmまで 横31mmまで	10枚	6,480円
貼付日数の目安				
●排泄物の性状や発汗量により変化します。				

バリケア® ワンピース ドレインパウチ 小児用




- クリップを使って排出口を留めるストーマ袋

カスタムカット、ワイヤークリップ15本付

注文番号	色	ストーマサイズ	入数	本体価格*
PDP5015	透明	50mmまで	15枚	6,480円
貼付日数の目安				
●排泄物の性状や発汗量により変化します。				

尿路用 平面型(全面皮膚保護剤)

バリケア® ワンピース ユリナパウチ 小児用(尿路用)

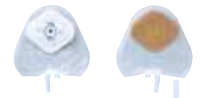

- 逆流防止弁付
- パイプ式尿タップで排出口を留めるストーマ袋

カスタムカット、アダプター*2個付

注文番号	色	ストーマサイズ	入数	本体価格*
PUP2515	透明	25mmまで	15枚	10,360円
貼付日数の目安				
●排泄物の性状や発汗量により変化します。				

*導尿バッグなどに接続する際に必要です。通常は使用しません。

二品系

面板 平面型(全面皮膚保護剤)

リトルワン™ ツーピース ウェハー ESサイズ

4.5kgまでの
お子さま用



- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- おなかの形に沿う円形の皮膚保護剤を採用
- 面板サイズ:直径66mm

カスタムカット

注文番号	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00821	23mmまで	5枚	4,210円
貼付日数の目安			
●排泄物の性状や発汗量により変化します。			

消化管用下部開放型 平面型(全面皮膚保護剤)

リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ

4.5kgまでの
お子さま用



- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- 巻き上げ式マジックテープタイプ

注文番号	色	入数	本体価格*
00824	透明	10枚	3,110円

面板 平面型(外周テープ付)

リトルワン™ ツーピース ハイドロウェハー

4.5kgを
超えた
お子さま用



- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- おなかの形に沿う円形の皮膚保護剤を採用
- 面板サイズ:保護剤部直径60mm、テープ部85×85mm

カスタムカット

注文番号	ストーマサイズ	入数	本体価格*
00823	4.8～31mmまで	5枚	4,210円
貼付日数の目安			
●排泄物の性状や発汗量により変化します。			

消化管用下部開放型 平面型(外周テープ付)

リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ 透明

4.5kgを
超えた
お子さま用



- 柔軟性が高く、装具の厚さが気にならない粘着式カップリング
- 2段階閉鎖の巻き上げ式マジックテープタイプ
- フィルター付

注文番号	色	入数	本体価格*
00825	透明	10枚	3,110円

Combination product

ストーマ装具併用品

ストーマ装具を快適にお使いいただくための製品をご紹介します。

- エセンタ™ 皮膚被膜剤
- エセンタ™ 粘着剥離剤
- ニオフ消臭潤滑剤
- ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用
- ニオフ消臭スプレー
- ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤
- コンバテック シール(用手成形皮膚保護剤)
- バリケア® ペースト(線状皮膚保護剤)
- バリケア® ウェハー(板状皮膚保護剤)
- バリケア® パウダー(粉状皮膚保護剤)
- コンバケア® バリア(皮膚被膜剤)
- コンバケア® リムーバー(粘着剥離剤)
- バリケア® ベルト
- オストミーシークレット

ESENTA™

エセンタ™



ひまく

エセンタ™
皮膚被膜剤

エセンタ™
粘着剥離剤

はがす

あらゆる角度から
スプレーできる

環境に配慮した
成分*を使用

お出かけしたくなる
スタイリッシュなデザイン

*地球温暖化への影響を低減するために、製品成分を噴射するガスの成分を変更しました。

エセンタ™ シリーズの特長

エセンタ™ 皮膚被膜剤

ひまく




ノンアルコール。
排泄物や粘着剤によるダメージから皮膚を保護します。


高性能シリコンベースで、薄い被膜を形成し、
剥離刺激などのダメージから皮膚を保護します。
皮膚のデリケートな方におすすめです

- 主にストーマ装具貼付前に、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に使用
- ノンアルコール
- シリコン素材
- 速乾タイプ
- どの角度からでもスプレー可能

エセンタ™ 皮膚被膜剤 スプレーの使い方

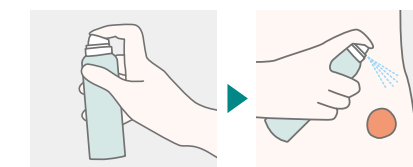


本品のふたを取り、上下
によく振ってください。

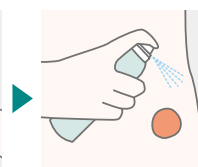


ストーマ周囲など皮膚を
保護したい部位に噴霧
してください。

エセンタ™ 皮膚被膜剤 ワイプの使い方

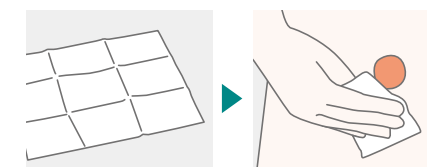

個包装を開封し、シート
を広げてください。

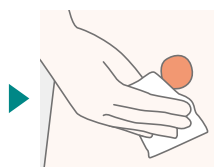

ストーマ周囲など皮膚を
保護したい部位を拭い
てください。

注意 傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。
アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。
本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

エセンタ™ 粘着剥離剤

はがす




剥がしやすく、肌にやさしい。
どの角度からでもスプレー可能。快適で安心のストーマライフを。


ストーマ装具を剥がす際に使用、
100%シリコン成分。
ストーマ装具が簡単に剥がせます。

- 主にストーマ装具、医療用テープの剥離に使用
- ノンアルコール・ノンオイル
- シリコン素材
- 無臭、速乾タイプ
- どの角度からでもスプレー可能


エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレーの使い方

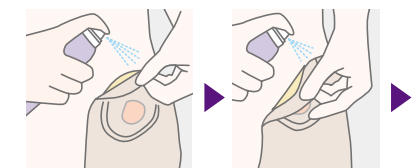

本品を粘着剤の周辺
部に噴霧後、数秒間
お待ちください。

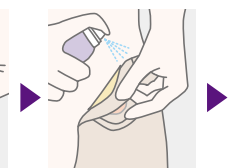


粘着剤を皮膚から
ゆっくりと剥がして
ください。

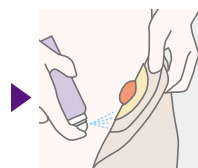

剥がれにくい場合、必
要に応じて本品をさら
に噴霧してください。

エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプの使い方

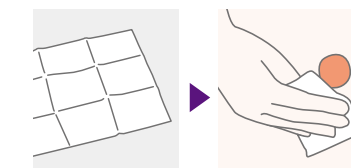

シートを広げ、速やかに、皮膚に残った粘着剤を
シートでやさしく拭き取ります。その後、ストーマ周
囲の皮膚を石鹸とぬるま湯で清潔にしてください。

注意 傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。
アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。
本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

前向きな気持ちで
踏みだす、そばに。



人への“想い”を込めたプロユース消臭剤ブランド
「nioff(ニオフ)」から生まれた消臭潤滑剤です。
ニオイの気がかりから外出を控えてしまう、
おつきあいがおっくうになる…。
そんなオストメイトの方の不安な気持ちに
確かな消臭・潤滑実感でお応えします。

✓ 消臭と潤滑、確かなWの実感

nioff独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを
を組み換えて消臭。高い潤滑作用で処理もスルッとスムーズです。

○抗菌成分(銅)で大腸菌の繁殖を抑制する抗菌性をもち、菌からの
ニオイの発生も抑制します。

✓ 安全性へのこだわり

高い品質と安全性にこだわった設計。肌のごく近くで使うもの
だから各種の安全性試験をクリアしています。

○ノンアルコール ○パラベンフリー ○無着色 素材自体(銅イオン)の青色

✓ ソフトな容器で押しやすく、入れやすい

容器が硬くて扱いにくいなどのお悩みをクリア。
中身が見えるので残量が確認しやすく、
1回分の使用量の目安になるメモリ付きです。



ボトル




ミニパック

nioff消臭潤滑剤
優れた消臭のメカニズム

パナソニック独自の
「リコンビネーション消臭」

ニオイを香りでごまかすのではなく、
銅イオンがニオイ分子に働きかけ、
構造そのものを組み換えて消臭します。
これがパナソニック独自の
「リコンビネーション消臭」です。
ニオイ分子自体が組み換わるため
消えたニオイは戻りません。

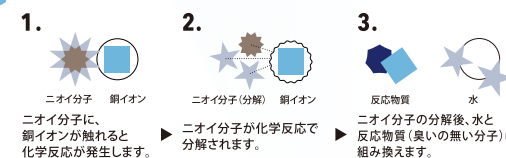

nioffシリーズを貫く
安全設計

安全性に徹底して
こだわっています

素材のすべてを、
肌にやさしい材料のみで構成しました。
確かな「安心」をめざして、
外部機関による安全性確認試験も重ねました。


- ✓ AMES試験(復帰突然変異試験)
- ✓ 急性経口毒性試験
- ✓ 皮膚刺激性試験
- ✓ 眼刺激性試験
- ✓ 皮膚感作性試験

(試験機関: (株)薬物安全性試験センター)

使い方


1. ストーマ袋交換時

ストーマ袋にあらかじめ
約8mL(大さじ半分程度)を投入し、
よくなじませてから装着する。

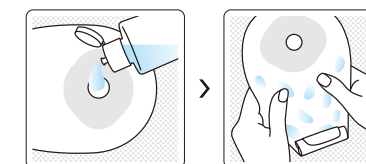

2. ストーマ袋装着中

装着中に排泄物を処理した際には、
もう一度約8mL(大さじ半分程度)投入し、
よくなじませる。

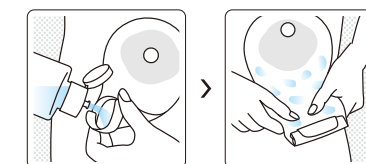

※使用により、便の色が黒くなる場合があります。

お得でエコな、つめかえ用も！



ご使用イメージ

1 ボトルのキャップを
「ギュッ」と力を入れて
開ける



2 ボトルの目盛りを
見ながらゆっくりと
注ぐ



3 ボトルは定期的な
交換をお勧めします

「ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用」
2回購入に1回は、通常ボトル
(250mL)の交換をお勧めします。

※衛生使用の観点と、ボトル劣化、
破損の恐れがあるため、交換
を強く推奨しています。




消臭実感と安全性に こだわりました。

パナソニックの独自技術で開発した
医療・介護向け本格プロユース

ニオフ消臭スプレー



使用イメージ

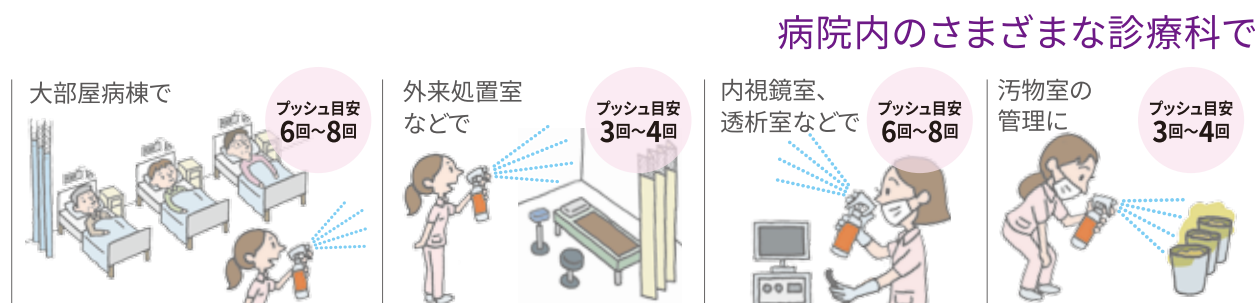


ニオフ消臭スプレーは、パナソニック化研株式会社が製造し、コンバテックジャパン株式会社が販売する製品です。

ニオフ消臭スプレーの特長


1 ニオフの消臭テクノロジー

nioff独自の技術「リコンビネーション消臭」

トイレ・便臭のニオイのもと硫化水素。この硫化水素を消すのに効果がある酸化亜鉛を可溶化し、かつ透明な溶液にすることに着目した独自の消臭技術。「亜鉛イオン」がすばやい消臭性能を発揮します。

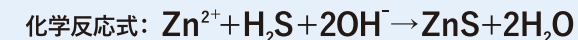

2 排泄物臭に即効性のある消臭効果。自壊創などの発するニオイも抑えます

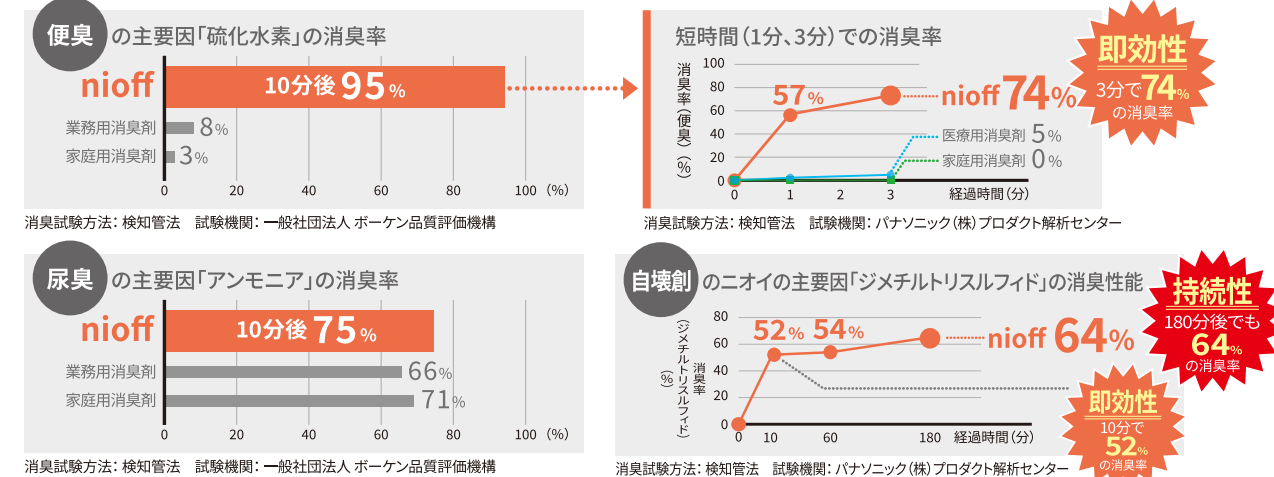

3 除菌効果でニオイの発生を抑制します


除菌試験結果 ニオフ消臭スプレーは、大腸菌、黄色ブドウ球菌に対して、除菌効果があります。



4 確かな 安全性

1.経口毒性 2.皮膚刺激性 3.眼刺激性 4.アレルギー性 5.変異原性
 5つの安全性試験をクリア。化粧品やベビーシャンプーに使用されている安全性の高い材料のみで構成されています。さらに遺伝子に突然変異を引き起こす作用が無いことも、変異原性 (Ames試験) で確認済みです。

介護施設、在宅介護のシーンで

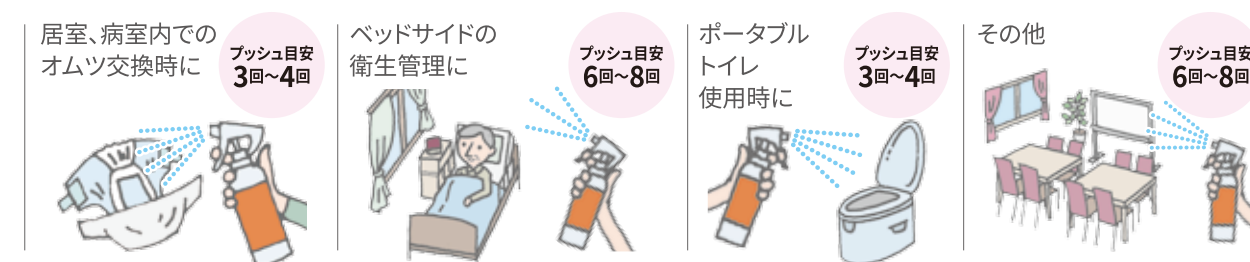

ニオイを防ぐ

ストーマ袋用消臭潤滑剤／消臭スプレー

ニオフ消臭潤滑剤 ボトル／ミニパック



- 独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭
- 大腸菌の繁殖を抑制し、菌からのニオイの発生も抑制します
- ノンアルコール、パラベンフリー、無着色
- ソフトな容器で押しやすく、入れやすい。外出にも便利なミニパックもあります

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
05016	250mL	1本	2,860円
05017	8mL	10袋	1,353円

ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用



- 独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭
- 大腸菌の繁殖を抑制し、菌からのニオイの発生も抑制します
- ノンアルコール、パラベンフリー、無着色
- お得でエコ、詰め替えも楽チン
- 2回購入に1回は、通常ボトル (250mL) の交換をお勧めします

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
05025	400mL	1袋	3,500円

ニオフ消臭スプレー



- さまざまな場面で、ニオイ問題を解決
- 独自の「リコンビネーション消臭」によりニオイ分子そのものを組み換えて消臭
- 大腸菌の繁殖を抑制し、菌からのニオイの発生も抑制します
- ノンアルコール、パラベンフリー、無着色

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
05018	200mL	1本	1,430円
05019	50mL	1本	770円
05023	2L	1本	9,350円

ストーマ袋用消臭剤・排泄物凝固剤

ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤



- 特許取得のアクティブワン消臭コントロールシステムが不快なニオイとガスを同時に軽減・除去します
- ガスの軽減・除去により、ストーマ袋の膨らみ (バルーニング) を軽減・防止します
- ゲル化により、排泄物の逆流や面板からの漏れを防ぎます。また手でストーマ袋を押さえると形状を平たくできます
- ゲル化した排泄物は、そのままトイレへ流すことが可能

携帯用ジップロック 1枚入

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
420791	100個	4,180円

ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用




- 特許取得のアクティブワン消臭コントロールシステムが不快なニオイとガスを同時に軽減・除去します
- ガスの軽減・除去により、ストーマ袋の膨らみ (バルーニング) を軽減・防止します
- ゲル化により、排泄物の逆流や面板からの漏れを防ぎます。また手でストーマ袋を押さえると形状を平たくできます
- ゲル化した排泄物は、そのままトイレへ流すことが可能 ●携帯に便利な5個入り

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
420792	5個	330円

漏れを防ぐ

用手成形皮膚保護剤

コンバテック シール

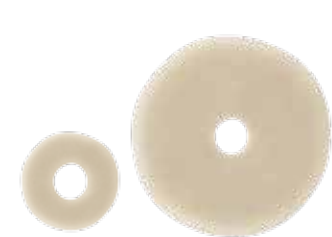

- ストーマ周囲の皺やくぼみを補正する用手成形皮膚保護剤
- 皺やくぼみにあわせ、必要量を手で練って自由に成形
- 水分吸収性に優れ、皮膚を排泄物の刺激からしっかり保護
- アルコールを含まず、乾燥しません
- バリケア® ペーストとの併用も可能

48mm薄型

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
413504	厚さ3.0mm×外径48mm	10枚	4,400円

48mm

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
413503	厚さ4.0mm×外径48mm	10枚	4,950円

98mm

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
413505	厚さ3.0mm×外径98mm	10枚	6,270円

練状皮膚保護剤

バリケア® ペースト




- ストーマ周囲の細かい皺・浅いくぼみを埋め、排泄物の漏れを防ぐ練状皮膚保護剤
- 皮膚保護剤「バリケア®」の親水性コロイド成分のみをペースト状にした製品

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
PA60	56.7g	1本	3,322円

板状皮膚保護剤

バリケア® ウェハー

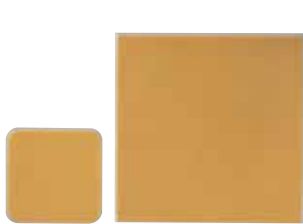

- ストーマ周囲の深い皺・くぼみを補正する板状皮膚保護剤
- 皮膚保護剤「バリケア®」を使用

10×10cm

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
AC1010	10×10cm	10枚	9,262円

20×20cm

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
AC2005	20×20cm	5枚	14,850円

粉状皮膚保護剤

バリケア® パウダー



- 水分を吸収しゲル状になり、排泄物の刺激から皮膚を保護
- 皮膚保護剤「バリケア®」の親水性コロイド成分のみを粉状にした製品

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
PW30	28.3g	1本	1,419円

皮膚を守る

皮膚被膜剤

エセンタ™ 皮膚被膜剤 スプレー (シリコンベース)

ひまく



- 主にストーマ装具貼付前に、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に使用
- 排泄物や排泄物に含まれる酵素、および粘着剤によるダメージから皮膚を保護
- ノンアルコール、シリコン素材
- 速乾タイプ
- あらゆる角度から噴射可能

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
423288	50mL	1本	2,178円

エセンタ™ 皮膚被膜剤 ワイプ (シリコンベース)

ひまく



- 主にストーマ装具貼付前に、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に使用
- 排泄物や排泄物に含まれる酵素、および粘着剤によるダメージから皮膚を保護
- ノンアルコール、シリコン素材
- 速乾タイプ
- 使いやすい大判ウェットティッシュタイプ

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
423282	30枚	3,564円

粘着剥離剤

エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレー (シリコンベース)

はがす



- 主にストーマ装具はがし用の粘着剥離剤
- ノンアルコール・ノンオイル、シリコン素材
- 無臭、速乾タイプ
- あらゆる角度から噴射可能

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
423289	50mL	1本	2,640円

エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプ (シリコンベース)

はがす



- 主に皮膚上に残った糊残りはがし用の粘着剥離剤
- ノンアルコール・ノンオイル、シリコン素材
- 無臭・速乾タイプ
- 使いやすい大判ウェットティッシュタイプ

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
423281	30枚	3,564円

皮膚被膜剤

コンバケア® バリア



- 主にストーマ装具貼付前に、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に使用
- 排泄物や排泄物に含まれる酵素、および粘着剤によるダメージから皮膚を保護
- 使いやすいウェットティッシュタイプ

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
COB50	50枚	2,970円

粘着剥離剤

コンバケア® リムーバー



- 主にストーマ装具はがし用の粘着剥離剤
- さわやかな柑橘系の香り
- 使いやすいウェットティッシュタイプ

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
COR50	50枚	3,674円

その他

ストーマ用ベルト

バリケア® ベルト



- ベルトタブのついた製品の固定に使用
- 装具の安定感を高めます

注文番号	規格	入数	本体価格 (税込み)
VB01	55～106cm	1本	946円

ストーマ用下着

オストミーシークレット

- 内側ポケットでしっかり支えるから動いても安心
- 膨らみを軽減するすっきりとしたデザイン

クラシック(コットン) 女性用



注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09559		S			
09560	ライラック	M	綿・ポリウレタン	1枚	2,200円
09561		L			

※Sサイズ...W:66～71cm／H:83～88cm Mサイズ...W:71～76cm／H:91～96cm
Lサイズ...W:81～86cm／H:99～104cm

クラシック(マイクロファイバー) 女性用



注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09550		S			
09551	ベージュ	M	ポリエステル・ポリウレタン	1枚	2,200円
09552		L			
09553		S			
09554	ブラック	M	ポリエステル・ポリウレタン	1枚	2,200円
09555		L			

※Sサイズ...W:66～71cm／H:83～88cm Mサイズ...W:71～76cm／H:91～96cm
Lサイズ...W:81～86cm／H:99～104cm

ボクサーブリーフ 男性用



注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09567		M			
09568	グレー	L	綿・ポリウレタン	1枚	2,420円
09570		M			
09571	ブラック	L	綿・ポリウレタン	1枚	2,420円

※Mサイズ...W:81～86cm Lサイズ...W:91～96cm

クラシックラップ 女性&男性用



注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09581		M			
09582	ブラック	L	ポリエステル・ポリウレタン	1枚	2,640円

※Mサイズ...W:71～76cm Lサイズ...W:81～86cm

スィムラップ 女性&男性用



注文番号	カラー	サイズ	素材	入数	本体価格 (税込み)
09575		S			
09576	ブラック	M	ナイロン・ポリウレタン	1枚	3,080円
09577		L			

※Sサイズ...W:66～71cm Mサイズ...W:71～76cm Lサイズ...W:81～86cm

オストミーシークレットについて

※各サイズについては、W(ウエスト)およびH(ヒップ)のサイズ表記をご参照ください。
※全ての商品は洗濯が可能です。

内側ポケットでしっかり支えるから動いても安心




全ての女性用パンツや男性用ボクサーパンツには前面に1つ大きなポケットがあります。



全てのラップ(腹巻き)には前面に左右に分かれた2つのポケットがあります。

ストーマの存在を忘れる、すっきりとした装着感。

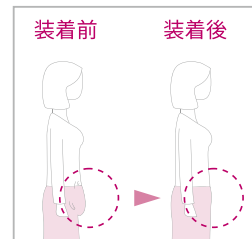

Irrigation Equipments

ストーマ用洗腸用具

セルフケアが可能な方のための洗腸製品をご紹介します。

片手で操作できる、洗腸器です

無段階で流量を調節できるロールクランプ式調節器採用。
自然排便法によるセルフケアが可能な左側結腸ストーマの方に、
操作がしやすい洗腸関連製品をご紹介します。

バリケア® 新洗腸器 ストーマコーン付



- 流量を調整できる
ロールクランプ式調節器採用
- 注水口が大きく開く
オープントップタイプ
- 注入量と排出量が一目で分かる
100cc単位大型水量目盛付

注文番号	入数	本体価格 (税込み)
SI01	1セット	5,940円
一般医療機器 ストーマ用洗浄キット 届出番号: 13B1X10071000001		

バリケア® ナチュラ™ 洗腸スリーブ



クリップ1個付

注文番号	フランジサイズ	入数	本体価格 (税込み)
00382	45mm	5枚	5,346円
00383	57mm		



ベルト対応

バリケア® 洗腸スリーブ用クリップ



注文番号	入数	本体価格 (税込み)
IL10	10本	4,268円

バリケア® 洗腸用ストーマコーン



注文番号	入数	本体価格 (税込み)
IC01	1個	2,376円

一般医療機器 ストーマ用洗浄キット
届出番号: 13B1X10071000001

バリケア® ナチュラ™ 洗腸用フェースプレート



注文番号	規格	ストーマサイズ	入数	本体価格 (税込み)
00387	45mm	44mmまで	1個	1,782円



ベルト対応

洗腸法を行うにあたって

必ず自然排便法によるセルフケアが行えることが前提となります。
下記の点を考慮し、**医師と相談のうえ**、実施してください。

- 左側結腸ストーマであること
- ストーマ合併症がないこと
- 心疾患がないこと
- 一人で行えること

※高齢の方や一時的なストーマの場合は、不適応となります。

How to use

製品の使用法

- 単品系ストーマ装具の使用法
- 二品系ストーマ装具の使用法
- ストーマ袋の閉鎖具の使用法
- ストーマ装具併用品の使用法

単品系ストーマ装具の使用法

エスティーム™ モルダブル製品の場合

モルダブルディスクを準備します

1

モルダブルディスク

モルダブルディスク (円盤状皮膚保護剤) をストーマ袋から取り外します。

2

『1』の剥離紙

『1』の剥離紙をはがします。こちら側が巻き上げる側になります。

3

親指 (あるいは他の指) を初孔の中心において皮膚保護剤を巻き広げ、穴をストーマのサイズに合わせて成形します。このとき、モルダブルディスク自体をより大きくしようと引き伸ばしたり、カットしたりしないでください。

4

ストーマの上から巻き広げられた穴の部分に合わせてみて、十分に皮膚保護剤が巻き広げられていることを確認します。

モルダブルディスクを貼付します

5

『2』の剥離紙

『2』の剥離紙をはがします。こちら側が皮膚貼付側になります。

6

モルダブルディスクを貼付します。モルダブルディスクがストーマ周囲の皮膚となじむように優しく押し当てます。ストーマ近接部の皮膚が露出している場合は、巻き広げられた皮膚保護剤を優しくそっとストーマに向かって戻します。

7

『3』の剥離紙をはがします。

『3』の剥離紙

ストーマ袋についている面板を貼付します

8

ストーマ袋をつまんで広げ、空気を入れます。ストーマ袋の排出口は閉じておきます。

9

ストーマ袋についている面板から剥離紙をはがします。

10

ストーマ袋についている面板をモルダブルディスクと周囲皮膚へ貼付します。

11

ストーマ袋の上から皮膚保護剤全体を軽く押さえ、しっかりと密着していることを確認し、そのまま30秒ほど押さええます。

※入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルター シールを貼付してください。

カスタムカットの場合

1 ストーマの大きさを測ります
メジャーリングガイド(計測紙)または定規を使ってストーマサイズを測ります。

2 ストーマのサイズに合わせて装具を切ります
面板の裏側に、ストーマの形に印をつけ、印の外側をハサミで切ります。穴の切り口を指でなでて滑らかにしておきます。
※ストーマ袋に空気を入れてから切ってください。面板を切るときに袋まで切ってしまうことを防止できます。

3 ストーマ袋を装着する前に、少量の空気を入れます
ストーマ袋を装着する前に、ストーマ袋を少し広げ、少量の空気をストーマ袋の中に入れてください。ストーマ袋の中に空気が入っていることにより、排泄物が排出口の方に移動しやすくなります。
※ストーマ袋の空気が抜けすぎる場合は、付属のフィルターシールを貼付しましょう。ストーマ袋の排出口は閉じておきます。

4 面板を貼付します
皮膚保護剤部分の剥離紙をはがして貼ります。やわらかい装具の場合、下から折るように貼ると、ストーマを見ながら落ちついて貼ることができます。皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、ストーマの周囲をしっかりと密着させます。テープ付タイプの場合は、最後にテープを皺が寄らないように密着させます。
※入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルターシールを貼付してください。

プレカットの場合

1 ストーマの大きさを測り、ご自身のストーマサイズに合ったプレカットを選択します
メジャーリングガイド(計測紙)または定規を使ってストーマサイズを測ります。ストーマの最大径と同じ、または少し大きいプレカットサイズを選択します。皮膚保護剤を切る必要はありません。

2 ストーマ袋を装着する前に、少量の空気を入れます
ストーマ袋を装着する前に、ストーマ袋を少し広げ、少量の空気をストーマ袋の中に入れてください。ストーマ袋の中に空気が入っていることにより、排泄物が排出口の方に移動しやすくなります。
※ストーマ袋の空気が抜けすぎる場合は、付属のフィルターシールを貼付しましょう。ストーマ袋の排出口は閉じておきます。

3 面板を貼付します
皮膚保護剤部分の剥離紙をはがし面板を下から折るように貼ると、ストーマを見ながら落ちついて貼ることができます。皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、ストーマの周囲をしっかりと密着させます。テープ付タイプの場合は、皮膚保護剤を密着させた後にテープに皺が寄らないように密着させます。
※入浴やシャワー、水泳のときは付属のフィルターシールを貼付してください。

二品系ストーマ装具の使用法

ストーマの大きさを測ります
メジャーリングガイド(計測紙)または定規を使ってストーマサイズを測ります。

面板ストーマ孔を成形し貼付します

モルダブル製品(平面)の場合

1 皮膚保護剤部分を巻き上げます
※白い剥離紙と透明のフィルムをはがさないで成形してください。
親指(あるいは他の指)を初孔の中心において巻き上げていきます。穴がストーマのサイズ、または、それ以上の大きさまで広げられていることを確認します。
※尿路ストーマの場合はロールガーゼで尿を吸いとりながら行うと交換がスムーズにできます。

2 面板を貼付します
穴を成形したあと、透明のフィルムをはがし、面板を貼付します。ストーマが面板の中心にくるようにして腹部にあてます。
※白い剥離紙ははがさないでください。

3 皮膚保護剤とストーマの間に隙間がないことを確認します
広げられた皮膚保護剤は装着後、自然に内側に向かって戻り、ストーマに優しくフィットします。面板貼付後さらに必要であれば、巻き上げられた皮膚保護剤をストーマに向かって戻すように調整します。

4 皮膚保護剤を密着させます
指で巻き上げられた皮膚保護剤をストーマ周囲に沿って優しく押し付けてください。さらに指または手の平で皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、確実に密着させてください。

5 粘着テープを貼ります
粘着テープから白い剥離紙をはがし、皺にならないように貼ってください。
※排泄物が出る場合は先にストーマ袋を装着してください。

モルダブル製品(凸面)の場合

1 保護用プラスチックシートにストーマの外形をペンなどで描きます。(メジャーリングガイド等を利用するとよいでしょう)
※白い剥離紙ははがさないでください。
保護剤側

2 ストーマ袋装着側より、プラスチックシートの中央部を指で巻き広げます。
ストーマ袋装着側


3 プラスチックシートをつけたままでストーマの外形を描いた線まで指で皮膚保護剤を巻き上げ、穴をストーマの形に広げます。
ストーマ袋装着側

4 巻き上げた部分を指で押しつけます。保護用プラスチックシートをはがし、面板を貼付します。
ストーマ袋装着側

カスタムカットの場合




1 ストーマのサイズに合わせて
面版を切ります
面版の裏側に、ストーマの形に印をつけ、印の外側をハサミで切ります。ストーマに面版をあてて、穴のサイズを確認しながら、適したサイズに切ってください。穴の切り口は指でなでて滑らかにしておきます。

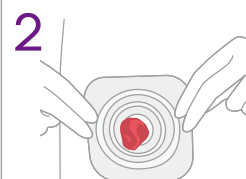


2 面版を貼付します
皮膚保護剤部分の剥離紙をはがして貼ります。皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、ストーマの周囲をしっかりと密着させます。テープ付タイプの場合は、テープに皺が寄らないように密着させます。

プレカットの場合

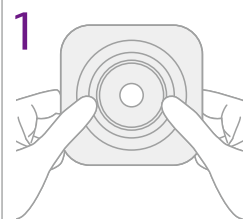

1 ご自身のストーマサイズに合った
プレカットサイズを選びます
ストーマの最大径と同じ、または少し大きいサイズを選択します。皮膚保護剤を切る必要はありません。
※白い剥離紙ははがさないでください。

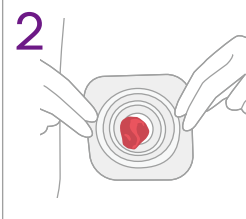

2 面版を貼付します
皮膚保護剤部分の剥離紙をはがして面版を貼ります。皮膚保護剤全体を30秒ほど押さえ、ストーマの周囲をしっかりと密着させます。皮膚保護剤部分を密着させてから、テープに皺が寄らないように密着させます。
※排泄物が出る場合はストーマ袋を装着してからテープを貼付します。

ストーマ袋を装着する前に、少量の空気を入れます



ストーマ袋を装着する前に、ストーマ袋を少し広げ、少量の空気をストーマ袋の中に入れてください。ストーマ袋の中に空気が入っていることにより、排泄物が排出口の方に移動しやすくなります。
※ストーマ袋の空気が抜けすぎる場合は、付属のフィルターシールを貼付しましょう。

ストーマ袋の装着と取り外し

※面版と同ブランド、同フレンジサイズのストーマ袋を使用してください。



※入浴やシャワー、水泳のときは
付属のフィルターシールを貼付
してください。

いずれのタイプの製品をお使いの場合も、面版とストーマ袋を嵌合した後は、ストーマ袋を優しく引っ張り、確実に装着されたことを確認してください。

〈ナチュラ™・アコーディオン®・バリケア® ナチュラ™の場合〉


面版とストーマ袋の嵌合リング下部の溝を合わせ、「パチッパチッ」という音を確認しながら、下から順に上部に向かって嵌めてください。

〈エスティーム シナジー®の場合〉

ストーマ袋の粘着部の下側から順にウェハー（面版）に粘着させて装着します。

〈バリケア® オートロックの場合〉

嵌合リングの溝を合わせ「パチッ」という音がするように嵌めてください。

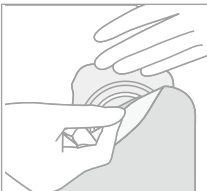

ストーマ袋を外すときは、ストーマ袋のつまみを下方向に引いて面版から外してください。
※バリケア® オートロックは、面版のつまみを操作した後、ストーマ袋を面版から外してください。

ナチュラ™ プラス、
バリケア® ナチュラ™、
バリケア® オートロック
の場合



エスティーム
シナジー®
の場合





ストーマ袋の閉鎖具の使用法

インビジクローズ® ドレインパウチ 改良型の場合




ナチュラ™ プラス／エスティーム シナジー®／エスティーム™（新設計ストーマ袋）

排出口を閉じる

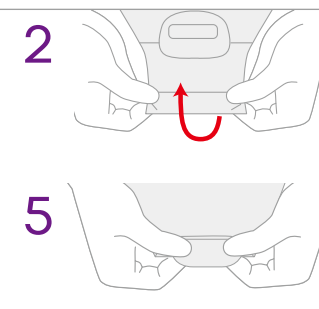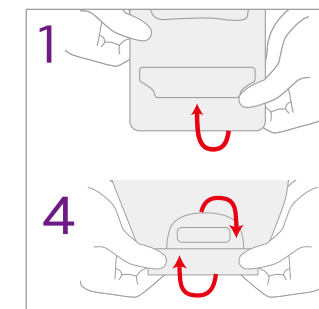




① 排出口端のプレートを折り上げます。
② プレートを1回折り上げた状態。
③ プレートを2回折り上げた状態。
④ プレートを3回折り上げた状態。
⑤ フラップをおろし、マジックテープを合わせ排出口を閉じます。

排出口をパウチポケットに収納

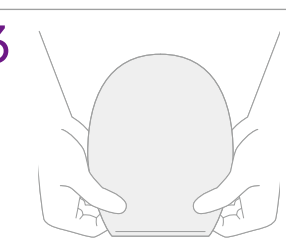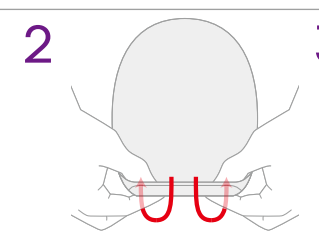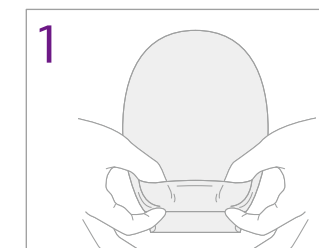

① 外側のポケットに両手の親指を差し込みます。
② 折りたたんだ部分全体を内側にひっくり返します。
③ 排出口を収納し、袋をコンパクトにすることができます。



排出口を開く

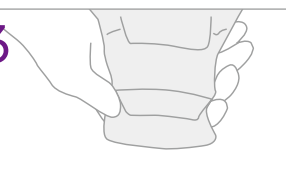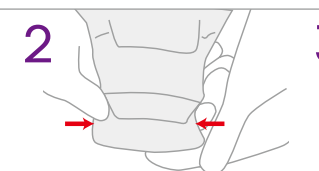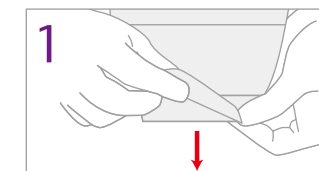




① フラップを持ち上げ、マジックテープを剥がします。
② プレート両端のくぼみ位置に指を合わせます。
③ 排出口を開きます。

インビジクローズ® ドレインパウチの場合

リトルワン™

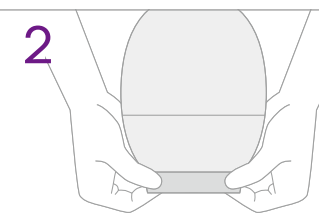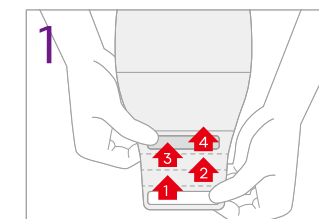

排出口端の白いプレートを4回折り上げます。重なったマジックテープ部がプチプチと音がするまでしっかり押して、排出口を閉じます。これで手順は完了です。

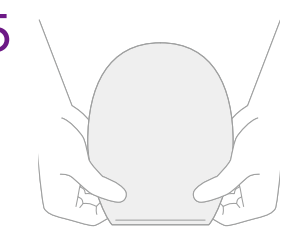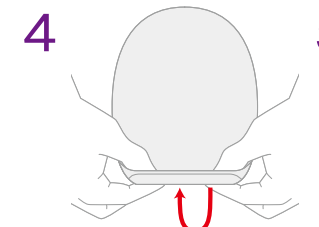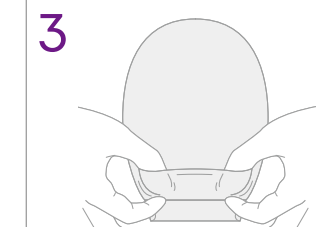

外側のポケットに指を引っ掛け、折りたたんだ排出口ごと内側へひっくり返せば、排出口を収納し、袋をコンパクトにすることができます。

やわらか凸・やわらか凸 シャロー (消化管用) の場合

装具の貼り方

1

2

3

①剥離紙をとりず。

②スリットからストーマを観察しながら貼付します。

③必要に応じてフィルターシールを貼ります。

排出口の閉じ方 排出口端にあるプレートに5回折り上げず。

1

2

3

②1回折り上げた状態

③5回折り上げた状態。

④フラップをおろし、マジックテープを合わせ排出口を閉じます。

⑤閉じた排出口を不織布の裏側へ隠すことができます。

4

5

やわらかイレオシリーズの場合

排出口の開け方・閉じ方

1

2

3

4

①排出口を上向きにします。

②キャップを外します。

③下向きにして排出します。

④キャップを閉めます。

やわらか凸 ウロ (尿路用) の場合

装具の貼り方

1

2

①剥離紙をとりず。

②スリットからストーマを観察しながら貼付します。

排出口の開け方・閉じ方

1

2

①排出口を上向きにします。

②キャップを外します。

③キャップをつまみながら下向きにして排出します。

④キャップを閉めます。

3

4

やわらか凸 シャローウロ (尿路用) の場合

排出口の開け方・閉じ方

1

2

①排出口を上向きにします。

②キャップを外します。

③下向きにして排出します。

④キャップを閉めます。

3

4

尿路用ストーマ袋の場合

ウロストミーパウチ

<開け方>

①キャップ (A) を開けます。

②回転式タップ (B) を赤い印が見えるように回転し、排出します。

<閉じ方>

①回転式タップ (B) を赤い印が見えないように回転します。

②キャップ (A) を閉じます。

ユリナパウチ

排出口を上向きにしてキャップを外し、排出口を下向きにして排出します。


ストーマ装具併用品の使用方法

補正用皮膚保護剤の使い分け

ストーマ周囲皮膚に皺やくぼみがある場合


コンバテック シール

皺やくぼみに合わせて、自由に成形して使用します。
アルコールを含んでいません。

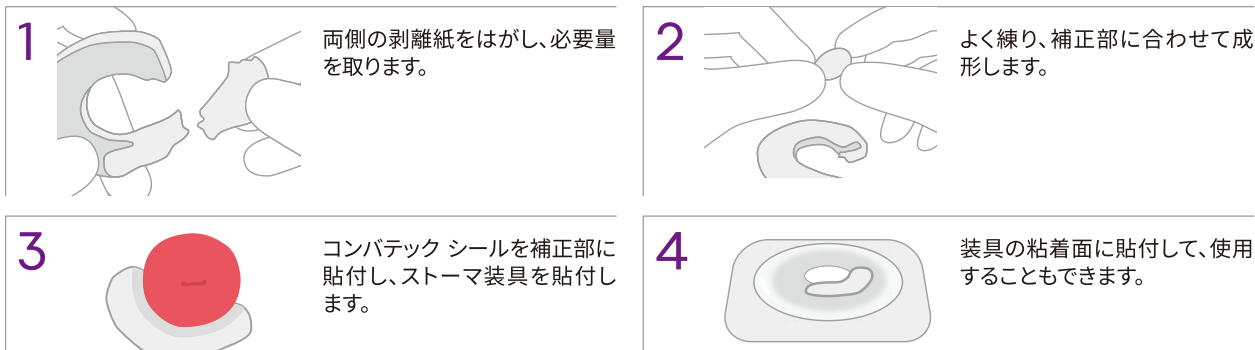


バリケア® ペースト

細かい皺がある場合に使用します。剥離紙をはがした後、皺の位置に応じて開けた穴のまぎわにペーストを塗ります。細かい皺が平坦になる程度の少量を塗るのが効果的です。30秒ほどペーストを乾かした後、装具を貼付してください。アルコールを含んでいるため、傷がある場合には直接塗らないでください。

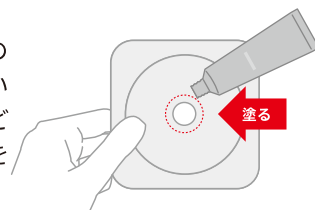

バリケア® ウェハー

コンバテック シールでは補正しきれない深い皺やくぼみを補正します。深い皺やくぼみが平坦になるよう、ハサミで切って使用します。排泄物が水様性の場合、バリケア® ウェハーと皮膚の段差をバリケア® ペーストやコンバテック シールなどでならかになるよう整えるといでしょう。

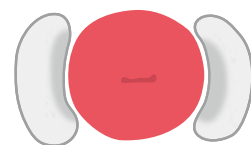


ストーマと皮膚保護剤の間に隙間がある場合

バリケア® パウダー

ストーマと皮膚保護剤の小さな隙間にふりかけます。水分を吸収するとゲル状になり、排泄物の刺激から皮膚を保護します。


※単品系装具をお使いの場合、バリケア® パウダーをストーマ周囲にふりかけた後、余分な粉をはたいてから、装具を貼付します。

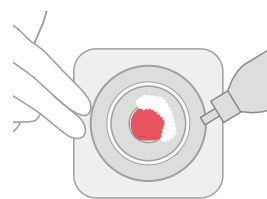

エセンタ™ シリーズ ワイプタイプ／コンバケア® の使用方法


皮膚被膜剤の場合

面板貼付前にシートを広げ、ストーマ周辺を拭き、乾かします。皮膚被膜剤は、薄い被膜を皮膚に作るものです。この被膜が粘着テープなどの剥離刺激を軽減し、排泄物が皮膚へ付着するのを防ぎます。

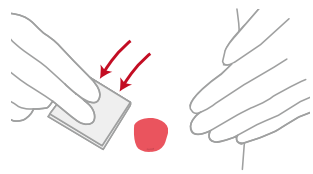

粘着剥離剤の場合


皮膚保護剤や粘着テープをはがすときに使用します。端から少しめくりストーマ周辺を拭き、ゆっくりはがしていきます。このとき、端から少しずつめくっていきます。

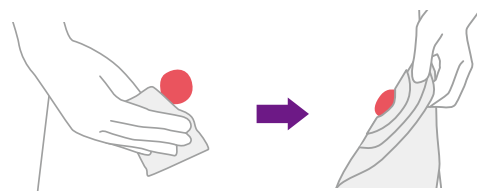

エセンタ™ シリーズ スプレータイプの使用方法


皮膚被膜剤の場合

面板貼付前にストーマ周辺に皮膚被膜剤をふきつけます。皮膚被膜剤は、薄い被膜を皮膚に作るものです。この被膜が粘着テープなどの剥離刺激を軽減し、排泄物が皮膚へ付着するのを防ぎます。

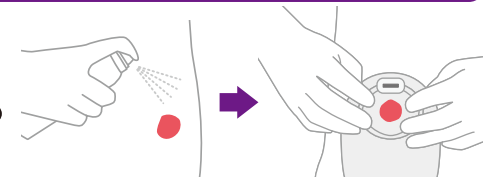


粘着剥離剤の場合

皮膚保護剤や粘着テープをはがすときに使用します。端から少しめくり「エセンタ」粘着剥離剤をふきかけながらゆっくりはがしていきます。このとき、端から少しずつめくっていきます。

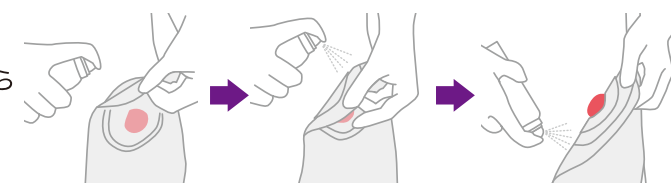


ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤の使用方法

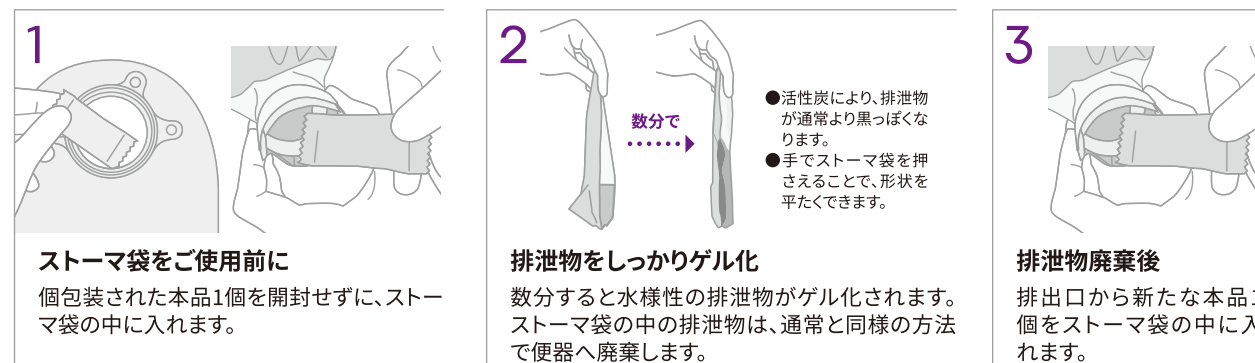

ニオブ消臭潤滑剤の使用方法



ニオブ消臭潤滑剤 つめかえ用の使用方法

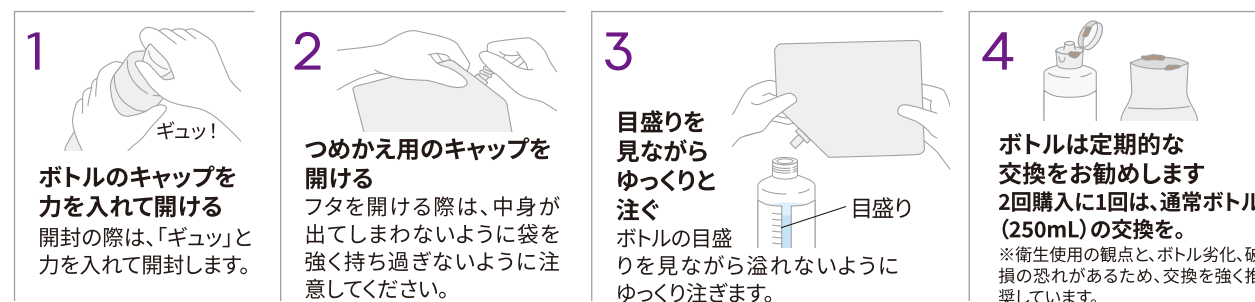

Index
索引

- 五十音順
- 製品番号順

索引(五十音順)

品名 ページ

アクティブライフ® ウロストミーパウチ(尿路用) 34

アクティブライフ® 術後用パウチ S 33

アクティブライフ® ドレインパウチ CD 33

アクティブライフ® ドレインパウチ DX 33

アクティブライフ® ドレインパウチ ST-2 33

アクティブライフ® ユリナパウチ CD(尿路用) 34

アクティブライフ® ユリナパウチ(尿路用) 34

エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 30

エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ CVX 31

エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期 30

エスティーム™ ウロ 長期(尿路用) 32

エスティーム™ クローズパウチ 32

エスティーム™ クローズパウチ(コンパクト) 32

エスティーム シナジー® インビジクローズ® ドレインパウチ 48

エスティーム シナジー® ウェハー 47

エスティーム シナジー® デュラヘーシブ® MCウェハー 48

エスティーム シナジー® ドレインパウチ ELサイズ 48

エスティーム シナジー® ハイドロウェハー 47

エスティーム™ ドレインパウチ 31

エスティーム™ モルダブル 29

エスティーム™ やわらか凸 ウロ(尿路用) 28

エスティーム™ やわらか凸(消化管用) 26

エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ(尿路用) 28

エスティーム™ やわらか凸 シャロー(消化管用) 26

エセンタ™ 粘着剥離剤 60

エセンタ™ 皮膚被膜剤 60

オストミーシークレット クラシック(コットン) 女性用 61

オストミーシークレット クラシック(マイクロファイバー) 女性用 61

オストミーシークレット クラシック ラップ 女性&男性用 61

オストミーシークレット スイム ラップ 女性&男性用 61

オストミーシークレット ボクサーブリーフ 男性用 61

コンバケア® バリア 60

コンバケア® リムーバー 60

コンバテック シール 59

ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 58

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ 41

デュラヘーシブ® ナチュラ™ MCフランジ 41

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ 38

デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトMフランジ 39

デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ 40

デュラヘーシブ® ナチュラ™ フランジ 40

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジ アコーディオン® 37

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ アコーディオン® 37

デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン® 36

デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン® 36

ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ 42

品名 ページ

ナチュラ™ プラス ウロストミーパウチ(尿路用) 44

ナチュラ™ プラス クローズパウチ 43

ナチュラ™ プラス クローズパウチ コンパクト 43

ニオフ消臭潤滑剤 58

ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用 58

ニオフ消臭スプレー 58

バリケア® ウェハー 59

バリケア® オートロック ウロストミーパウチ(尿路用) 46

バリケア® オートロック クローズパウチ 46

バリケア® オートロック ソフトフランジ 45

バリケア® オートロック デュラヘーシブ® ソフトフランジ 45

バリケア® オートロック ドレインパウチ 46

バリケア® オートロック フランジ 45

バリケア® オートロック ユリナパウチ(尿路用) 46

バリケア® 新洗腸器 ストーマコーン付 63

バリケア® 洗腸スリーブ用クリップ 63

バリケア® 洗腸用ストーマコーン 63

バリケア® ナチュラ™ Mフランジ 38

バリケア® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン® 36

バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ 43

バリケア® ナチュラ™ ウロストミーパウチ(尿路用) 44

バリケア® ナチュラ™ コンベックスインサート(凸型嵌め込み具) 40

バリケア® ナチュラ™ ソフトMフランジ 38

バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ 39

バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン® 36

バリケア® ナチュラ™ ドレインパウチ 42

バリケア® ナチュラ™ ハイドロフランジ 39

バリケア® ナチュラ™ フランジ 40

バリケア® ナチュラ™ ユリナパウチ(尿路用) 44

バリケア® ナチュラ™ 洗腸スリーブ 63

バリケア® ナチュラ™ 洗腸用フェースプレート 63

バリケア® パウダー 59

バリケア® ベースト 59

バリケア® ベルト 61

バリケア® ワンピース ドレインパウチ 小児用 50

バリケア® ワンピース ユリナパウチ 小児用(尿路用) 50

やわらか凸 イレオ 27

やわらか平面 イレオ 27

やわらか凸 シャロー イレオ 27

リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ 50

リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ 透明 50

リトルワン™ ツーピース ウェハー ESサイズ 50

リトルワン™ ツーピース ハイドロウェハー 50

リトルワン™ ワンピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ 50

製品番号	品名		ページ
00110	バリケア® オートロック フランジ	カスタムカット 35mm 20mmまで	45
00111		カスタムカット 45mm 20-30mm	45
00116	バリケア® オートロック デュラヘーシブ® ソフトフランジ	カスタムカット 35mm 20mmまで	45
00117		カスタムカット 45mm 20-30mm	45
00120	バリケア® オートロック ソフトフランジ	カスタムカット 35mm 20mmまで	45
00121		カスタムカット 45mm 20-30mm	45
00123		カスタムカット 57mm 30-42mm	45
00131	バリケア® オートロック ドレインパウチ	45mm 透明	46
00133		57mm 透明	46
00137	バリケア® オートロック クローズパウチ	45mm 肌色 フィルター付	46
00138		57mm 肌色 フィルター付	46
00140	バリケア® オートロック ドレインパウチ	35mm 肌色	46
00141		45mm 肌色	46
00143		57mm 肌色	46
00146	バリケア® オートロック ユリナパウチ(尿路用)	35mm 透明	46
00147		45mm 透明	46
00148		57mm 透明	46
00150	バリケア® オートロック ウロストミーパウチ(尿路用)	35mm 透明	46
00151		45mm 透明	46
00153		57mm 透明	46
00200	アクティブライフ® ドレインパウチ ST-2	カスタムカット 19-64mm 透明	33
00246	バリケア® ナチュラ™ ハイドロフランジ	カスタムカット 38mm 17-23mm	39
00247		カスタムカット 45mm 23-30mm	39
00248		カスタムカット 57mm 30-42mm	39
00249		カスタムカット 70mm 42-55mm	39
00251	バリケア® ナチュラ™ フランジ	カスタムカット 38mm 17-23mm	40
00252		カスタムカット 45mm 23-30mm	40
00253		カスタムカット 57mm 30-42mm	40
00254		カスタムカット 70mm 42-55mm	40
00255		カスタムカット 100mm 55-85mm	40
00261	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ	カスタムカット 38mm 17-23mm	39
00262		カスタムカット 45mm 23-30mm	39
00263		カスタムカット 57mm 30-42mm	39
00264	デュラヘーシブ® ナチュラ™ MCフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm	41
00265		モルダブル 45mm M 22-33mm	41
00266		モルダブル 57mm L 33-45mm	41
00271	デュラヘーシブ® ナチュラ™ フランジ	カスタムカット 38mm 23mmまで	40
00272		カスタムカット 45mm 23-30mm	40
00273		カスタムカット 57mm 30-42mm	40
00277	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ	カスタムカット 38mm 23mmまで	40
00278		カスタムカット 45mm 23-30mm	40
00279		カスタムカット 57mm 30-42mm	40
00281	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ	プレカット 45mm 13mm	41
00282		プレカット 45mm 16mm	41
00283		プレカット 45mm 19mm	41
00284		プレカット 45mm 22mm	41
00285		プレカット 45mm 25mm	41
00286		プレカット 45mm 28mm	41
00287		プレカット 45mm 32mm	41
00288		プレカット 45mm 35mm	41
00290	バリケア® ナチュラ™ ドレインパウチ	38mm 肌色	42
00291		45mm 肌色	42
00292		45mm 肌色	42
00293		57mm 肌色	42
00295	バリケア® ナチュラ™ Mフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm	38
00296		モルダブル 45mm M 22-33mm	38
00297		モルダブル 57mm L 33-45mm	38
00298		モルダブル 70mm XL 45-56mm	38


製品番号	品名		ページ
00305	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ	モルダブル 45mm S 13-22mm	38
00306		モルダブル 45mm M 22-33mm	38
00307		モルダブル 57mm L 33-45mm	38
00308		モルダブル 70mm XL 45-56mm	38
00311	バリケア® ナチュラ™ ドレインパウチ	38mm 透明	42
00312		45mm 透明	42
00313		45mm 透明	42
00314		57mm 透明	42
00315		70mm 透明	42
00316		100mm 透明	42
00320	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ	プレカット 45mm 16mm	39
00321		プレカット 45mm 19mm	39
00322		プレカット 45mm 22mm	39
00323		プレカット 45mm 25mm	39
00324		プレカット 45mm 28mm	39
00325		プレカット 45mm 32mm	39
00326		プレカット 45mm 35mm	39
00332	バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ	45mm 肌色 フィルター付	43
00333		57mm 肌色 フィルター付	43
00334		70mm 肌色 フィルター付	43
00361	バリケア® ナチュラ™ ユリナパウチ(尿路用)	38mm 透明	44
00362		45mm 透明	44
00363		57mm 透明	44
00371	バリケア® ナチュラ™ ウロストミーパウチ(尿路用)	38mm 透明	44
00372		45mm 透明	44
00373		57mm 透明	44
00374		70mm 透明	44
00382	バリケア® ナチュラ™ 洗腸スリーブ	45mm	63
00383		57mm	63
00387	バリケア® ナチュラ™ 洗腸用フェースプレート	45mm 44mmまで	63
00391	バリケア® ナチュラ™ コンベックスインサート	38mm S (19mm) 13mm以下	40
00392	(凸型嵌め込み具)	38mm M (22mm) 13-16mm	40
00393		38mm L (25mm) 16-19mm	40
00394		45mm S (29mm) 19-22mm	40
00395		45mm M (32mm) 22-25mm	40
00396		45mm L (35mm) 25-29mm	40
00397		57mm S (38mm) 29-32mm	40
00398		57mm M (41mm) 32-35mm	40
00820	リトルワン™ ワンピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ	カスタムカット 透明 縦25mmまで 横31mmまで	50
00821	リトルワン™ ツーピース ウェハー ESサイズ	カスタムカット 23mmまで	50
00823	リトルワン™ ツーピース ハイドロウェハー	4.8-31mmまで	50
00824	リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ ESサイズ	透明	50
00825	リトルワン™ ツーピース インビジクローズ® ドレインパウチ 透明	透明 フィルター付	50
00925	アクティブライフ® ウロストミーパウチ(尿路用)	プレカット 19mm 透明	34
00926		プレカット 22mm 透明	34
00927		プレカット 25mm 透明	34
00928		プレカット 28mm 透明	34
00929		プレカット 32mm 透明	34
05016	ニオフ消臭潤滑剤 ボトル	250mL	58
05017	ニオフ消臭潤滑剤 ミニパック	8mL	58
05018	ニオフ消臭スプレー	200mL	58
05019		50mL	58
05023		2L	58
05025	ニオフ消臭潤滑剤 つめかえ用	400mL	58

製品番号	品名		ページ
09009	エスティーム シナジー® ドレインパウチ ELサイズ	89mm 透明	48
09069	エスティーム シナジー® ウェハー	カスタムカット 89mm 61-89mm	47
09075	エスティーム シナジー® デュラヘーシブ® MCウェハー	モルダブル 35mm 13-22mm	48
09076		モルダブル 48mm 22-33mm	48
09077		モルダブル 61mm 33-45mm	48
09105	エスティーム シナジー® ハイドロウェハー	カスタムカット 35mm 35mmまで	47
09106		カスタムカット 48mm 35-48mm	47
09107		カスタムカット 61mm 48-61mm	47
09111		プレカット 35mm 25mm	47
09112		プレカット 35mm 28mm	47
09113		プレカット 35mm 32mm	47
09114		プレカット 35mm 35mm	47
09115		プレカット 48mm 38mm	47
09550	オストミー シークレット クラシック(マイクロファイバー) 女性用	S ベージュ	61
09551		M ベージュ	61
09552		L ベージュ	61
09553		S ブラック	61
09554		M ブラック	61
09555		L ブラック	61
09559	クラシック(コットン) 女性用	S ライラック	61
09560		M ライラック	61
09561		L ライラック	61
09567	ボクサーブリーフ 男性用	M グレー	61
09568		L グレー	61
09570		M ブラック	61
09571		L ブラック	61
09575	スイム ラップ 女性&男性用	S ブラック	61
09576		M ブラック	61
09577		L ブラック	61
09581	クラシック ラップ 女性&男性用	M ブラック	61
09582		L ブラック	61
413417	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトMフランチ	モルダブル 45mm S 13-22mm	39
413418		モルダブル 45mm M 22-33mm	39
413419		モルダブル 57mm L 33-45mm	39
413420		モルダブル 70mm XL 45-56mm	39
413421	バリケア® ナチュラ™ ソフトMフランチ	モルダブル 45mm S 13-22mm	38
413422		モルダブル 45mm M 22-33mm	38
413423		モルダブル 57mm L 33-45mm	38
413424		モルダブル 70mm XL 45-56mm	38
413437	ナチュラ™ プラス ウロストミーパウチ	45mm 透明	44
413438		57mm 透明	44
413439		70mm 透明	44
413503	コンバテック シール	48mm 厚さ4mm×外径48mm	59
413504		48mm薄型 厚さ3mm×外径48mm	59
413505		98mm 厚さ3mm×外径98mm	59
413515	エスティーム™ モルダブル	モルダブル M 21-30mm 透明 フィルター付	29
413516		モルダブル L 31-40mm 透明 フィルター付	29
413517		モルダブル XL 41-50mm 透明 フィルター付	29
413518		モルダブル M 21-30mm 透明	29
413519		モルダブル L 31-40mm 透明	29
413521		モルダブル M 21-30mm 肌色 フィルター付	29
413522		モルダブル L 31-40mm 肌色 フィルター付	29
413523		モルダブル XL 41-50mm 肌色 フィルター付	29

製品番号	品名		ページ
416414	ナチュラ™ プラス インビジクローズ® ドレインパウチ	38mm 透明 フィルター付	42
416415		38mm 肌色 フィルター付	42
416416		45mm 透明 フィルター付	42
416417		45mm 肌色 フィルター付	42
416418		45mm 透明	42
416419		57mm 透明 フィルター付	42
416420		57mm 肌色 フィルター付	42
416421		57mm 透明	42
416422		70mm 透明 フィルター付	42
416423		70mm 肌色 フィルター付	42
416424		70mm 透明	42
416472		100mm 透明	42
416700	エスティーム™ クローズパウチ	カスタムカット 20-70mm 透明 フィルター付	32
416701		カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	32
416703		プレカット 25mm 透明 フィルター付	32
416704		プレカット 25mm 肌色 フィルター付	32
416706		プレカット 30mm 透明 フィルター付	32
416707		プレカット 30mm 肌色 フィルター付	32
416712		プレカット 40mm 透明 フィルター付	32
416713		プレカット 40mm 肌色 フィルター付	32
416717	エスティーム™ ドレインパウチ	カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	31
416718	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ	カスタムカット 20-70mm 透明 フィルター付	30
416719		カスタムカット 20-70mm 肌色 フィルター付	30
416723	エスティーム™ ドレインパウチ	プレカット 25mm 肌色 フィルター付	31
416724	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ	プレカット 25mm 透明 フィルター付	30
416725		プレカット 25mm 肌色 フィルター付	30
416727	エスティーム™ ドレインパウチ	プレカット 30mm 肌色 フィルター付	31
416728	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ	プレカット 30mm 透明 フィルター付	30
416729		プレカット 30mm 肌色 フィルター付	30
416732		プレカット 35mm 透明 フィルター付	30
416733		プレカット 35mm 肌色 フィルター付	30
416735	エスティーム™ ドレインパウチ	プレカット 40mm 肌色 フィルター付	31
416736	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ	プレカット 40mm 透明 フィルター付	30
416737		プレカット 40mm 肌色 フィルター付	30
416738	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ CVX	プレカット 19mm 透明 フィルター付	31
416739		プレカット 19mm 肌色 フィルター付	31
416740		プレカット 22mm 透明 フィルター付	31
416741		プレカット 22mm 肌色 フィルター付	31
416742		プレカット 25mm 透明 フィルター付	31
416743		プレカット 25mm 肌色 フィルター付	31
416744		プレカット 28mm 透明 フィルター付	31
416745		プレカット 28mm 肌色 フィルター付	31
416746		プレカット 32mm 透明 フィルター付	31
416747		プレカット 32mm 肌色 フィルター付	31
416748		プレカット 35mm 透明 フィルター付	31
416749		プレカット 35mm 肌色 フィルター付	31
416750		プレカット 38mm 透明 フィルター付	31
416751		プレカット 38mm 肌色 フィルター付	31
416795	エスティーム シナジー® インビジクローズ® ドレインパウチ	35mm 透明 フィルター付	48
416796		35mm 肌色 フィルター付	48
416798		48mm 透明 フィルター付	48
416799		48mm 肌色 フィルター付	48
416901		61mm 透明 フィルター付	48
416902		61mm 肌色 フィルター付	48
416975	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期	カスタムカット 19-64mm 肌色 フィルター付	30
416976		カスタムカット 19-64mm 透明 フィルター付	30
420695	バリケア® ナチュラ™ イレオストミーパウチ	45mm 透明 フィルター付	43
420696		57mm 透明 フィルター付	43
420697		70mm 透明 フィルター付	43

製品番号	品名					ページ
420791	ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤					58
420792	ダイヤモンド™ 消臭・吸収ゲル化剤 携帯用					58
421020	エスティーム™ インビジクローズ® ドレインパウチ 中長期	プレカット	25mm	透明	フィルター付	30
421021		プレカット	28mm	透明	フィルター付	30
421022		プレカット	32mm	透明	フィルター付	30
421023		プレカット	35mm	透明	フィルター付	30
421024		プレカット	38mm	透明	フィルター付	30
421025		プレカット	25mm	肌色	フィルター付	30
421026		プレカット	28mm	肌色	フィルター付	30
421027		プレカット	32mm	肌色	フィルター付	30
421028		プレカット	35mm	肌色	フィルター付	30
421029		プレカット	38mm	肌色	フィルター付	30
421030	バリケア® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®	モルダブル	57mmAS	13-22mm		36
421031		モルダブル	57mmAM	22-33mm		36
421032		モルダブル	70mmAL	33-45mm		36
421036	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Mフランジ アコーディオン®	モルダブル	57mmAS	13-22mm		36
421037		モルダブル	57mmAM	22-33mm		36
421038		モルダブル	70mmAL	33-45mm		36
421453	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	45mm	13-21mm		36
421455	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	45mm	13-21mm		36
421457	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	57mm	13-33mm		36
421459	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	57mm	13-33mm		36
421461	デュラヘーシブ® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	70mm	13-45mm		36
421463	バリケア® ナチュラ™ ソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	70mm	13-45mm		36
421615	エスティーム™ やわらか凸 (消化管用)	カスタムカット	20-40mm	L 肌色	フィルター付	26
421617		プレカット	30mm	L 肌色	フィルター付	26
421618		プレカット	35mm	L 肌色	フィルター付	26
421619		カスタムカット	20-30mm	M 肌色	フィルター付	26
421621		プレカット	30mm	M 肌色	フィルター付	26
421623	エスティーム™ やわらか凸 ウロ (尿路用)	カスタムカット	10-40mm	L 肌色		28
421625		プレカット	20mm	L 肌色		28
421626		カスタムカット	10-30mm	M 肌色		28
421628		カスタムカット	10-18mm	S 肌色		28
421631	エスティーム™ ウロ 長期 (尿路用)	カスタムカット	13-45mm	透明		32
421632	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	45mm	13-22mm		37
421633	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ アコーディオン®	カスタムカット	45mm	13-22mm		37
421634	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	57mm	13-35mm		37
421635	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ アコーディオン®	カスタムカット	57mm	13-35mm		37
421636	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cソフトフランジ アコーディオン®	カスタムカット	70mm	13-48mm		37
421637	デュラヘーシブ® ナチュラ™ Cフランジ アコーディオン®	カスタムカット	70mm	13-48mm		37
421680	ナチュラ™ プラス クローズパウチ	45mm	肌色	フィルター付		43
421681		45mm	肌色			43
421682		57mm	肌色	フィルター付		43
421683		57mm	肌色			43
421796	ナチュラ™ プラス クローズパウチ コンパクト	45mm	肌色	フィルター付		43
421797		57mm	肌色	フィルター付		43
421816	エスティーム™ クローズパウチ (コンパクト)	カスタムカット	20-70mm	肌色	フィルター付	32
421934	やわらか平面 イレオ	カスタムカット	20-60mm	肌色	フィルター付	27
421935	やわらか凸 イレオ	カスタムカット	15-40mm	L 肌色	フィルター付	27
421936		カスタムカット	15-30mm	M 肌色	フィルター付	27
421937		カスタムカット	15-20mm	S 肌色	フィルター付	27
422159	エスティーム™ やわらか凸 (消化管用)	カスタムカット	20-55mm	XL 肌色	フィルター付	26

製品番号	品名					ページ
422363	エスティーム™ やわらか凸 シャロー（消化管用）	カスタムカット	20-47mm	L 肌色	フィルター付	26
422364		カスタムカット	15-40mm	M 肌色	フィルター付	26
422365		カスタムカット	10-28mm	S 肌色	フィルター付	26
422542		プレカット	40mm	L 肌色	フィルター付	26
422543		プレカット	45mm	L 肌色	フィルター付	26
422545		プレカット	25mm	M 肌色	フィルター付	26
422546		プレカット	30mm	M 肌色	フィルター付	26
422547		プレカット	35mm	M 肌色	フィルター付	26
422551	エスティーム™ やわらか凸 シャロー ウロ（尿路用）	カスタムカット	20-47mm	L 肌色		28
422560		プレカット	30mm	M 肌色		28
422561		プレカット	35mm	M 肌色		28
422563		プレカット	15mm	S 肌色		28
422564		プレカット	20mm	S 肌色		28
422565		プレカット	25mm	S 肌色		28
423281	エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイブ					60
423282	エセンタ™ 皮膚被膜剤 ワイブ					60
423288	エセンタ™ 皮膚被膜剤 スプレー	50mL				60
423289	エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレー	50mL				60
423511	やわらか凸 シャロー イレオ	カスタムカット	20-47mm	L 肌色	フィルター付	27
423512		カスタムカット	15-40mm	M 肌色	フィルター付	27
423513		カスタムカット	10-28mm	S 肌色	フィルター付	27
423514		プレカット	40mm	L 肌色	フィルター付	27
423515		プレカット	45mm	L 肌色	フィルター付	27
423516		プレカット	25mm	M 肌色	フィルター付	27
423517		プレカット	30mm	M 肌色	フィルター付	27
423518		プレカット	35mm	M 肌色	フィルター付	27
AC1010	バリケア® ウェハー	10×10cm				59
AC2005		20×20cm				59
ADC1905	アクティブライフ® ドレインパウチ CD	プレカット	19mm	透明		33
ADC2205		プレカット	22mm	透明		33
ADC2505		プレカット	25mm	透明		33
ADC2805		プレカット	28mm	透明		33
ADC3205		プレカット	32mm	透明		33
ADC3505		プレカット	35mm	透明		33
ADC3805		プレカット	38mm	透明		33
ADC4505		プレカット	45mm	透明		33
ADC5005		プレカット	50mm	透明		33
ADD6410	アクティブライフ® ドレインパウチ DX	カスタムカット	19-64mm	透明		33
APS7010	アクティブライフ® 術後用パウチ S	カスタムカット	19-70mm	透明		33
AUC1305	アクティブライフ® ユリナパウチ CD（尿路用）	プレカット	13mm	透明		34
AUC1605		プレカット	16mm	透明		34
AUC1905		プレカット	19mm	透明		34
AUC2205		プレカット	22mm	透明		34
AUC2505		プレカット	25mm	透明		34
AUC2805		プレカット	28mm	透明		34
AUC3205		プレカット	32mm	透明		34
AUC3505		プレカット	35mm	透明		34
AUP4510	アクティブライフ® ユリナパウチ（尿路用）	カスタムカット	19-45mm	透明		34
COB50	コンバケア® バリア					60
COR50	コンバケア® リムーバー					60
IC01	バリケア® 洗腸用ストーマコーン					63
IL10	バリケア® 洗腸スリーブ用クリップ					63
PA60	バリケア® ペースト	56.7g				59
PDP5015	バリケア® ワンピース ドレインパウチ 小児用	カスタムカット	50mmまで	透明		50
PUP2515	バリケア® ワンピース ユリナパウチ 小児用（尿路用）	カスタムカット	25mmまで	透明		50
PW30	バリケア® パウダー	28.3g				59
SI01	バリケア® 新洗腸器 ストーマコーン付					63
VB01	バリケア® ベルト	55-106cm				61

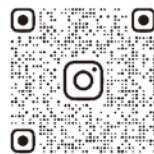

CONVATEC.JAPAN



convatec
—よりそい、つなぐ—

コンバテック ジャパン株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-7

お客様相談窓口

 **0120-532384**
<https://www.convatec.com/ja-jp/>